



R-Net Steuerung System



Gebrauchsanweisung

The logo for QUICKIE, featuring a stylized swoosh above the word 'QUICKIE' in a bold, sans-serif font.



015684

www.sunrisemedical.com

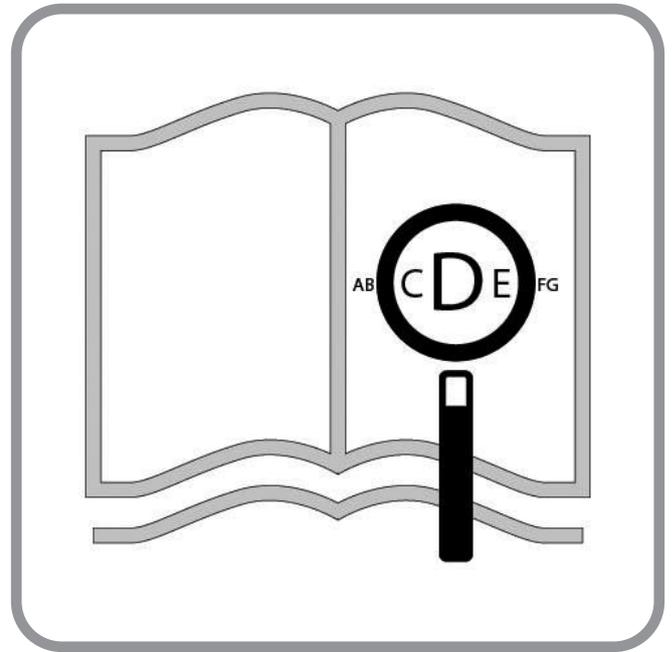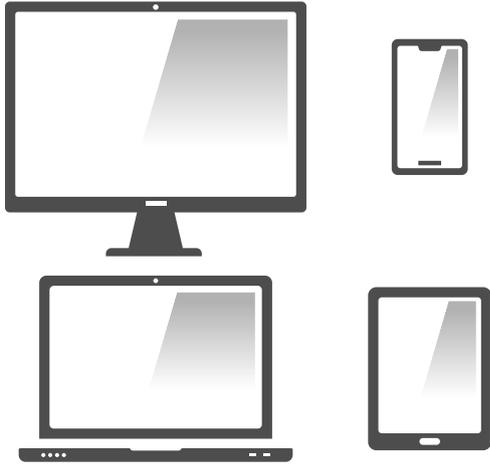

Für sehbehinderte personen steht dieses dokument im pdf-format auf www.Sunrisemedical.De zur verfügung.

Informationen für den Benutzer

Bestimmungsgemäße Verwendung für Elektro-Rollstühle:

Verwendung

Elektro-Rollstühle sind ausschließlich für gehunfähige oder gehbehinderte Menschen zum persönlichen Gebrauch im Haus und im Freien bestimmt.

Wenn eine Steuerung für eine Begleitperson eingebaut ist, kann der Elektro-Rollstuhl auch von der Begleitperson gesteuert werden.

Wenn eine Dualsteuerung eingebaut ist, kann der Elektro-Rollstuhl vom Benutzer gesteuert werden oder die Steuerung kann auf eine Begleitperson umgestellt werden, die den Rollstuhl für den Benutzer steuert.

Das Höchstgewicht (das Körpergewicht des Benutzers und das Gewicht des im Rollstuhl eingebauten Zubehörs) ist auf dem Etikett mit der Seriennummer angegeben, das am Fahrgestell angebracht ist.

Eine Gewähr kann nur übernommen werden, wenn das Produkt unter den vorgegebenen Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken eingesetzt wird.

Die vorgesehene Lebensdauer des Rollstuhls beträgt 5 Jahre. Bitte KEINE Teile von anderen Herstellern verwenden, außer diese sind von Sunrise Medical offiziell zugelassen.



WICHTIG:

BENUTZEN SIE IHREN ROLLSTUHL ERST, WENN SIE DIESES HANDBUCH VOLLSTÄNDIG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN.

Für Informationen über die Konformität im Rahmen der CE-Kennzeichnung kontaktieren Sie bitte PG Drives Technology bei Curtiss-Wright.

In dieser Anweisung verwendete Begriffsdefinitionen

Wort	Definition
 GEFAHR!	Anweisung an den Benutzer, dass ein potentielles Verletzungsrisiko besteht, wenn der Anweisung nicht entsprochen wird
 WARNUNG!	Anweisung an den Benutzer, dass ein Verletzungsrisiko besteht, wenn der Anweisung nicht entsprochen wird.
 VORSICHT!	Anweisung an den Benutzer, dass ein möglicher Sachschaden am Rollstuhl auftreten kann, wenn der Anweisung nicht entsprochen wird
HINWEIS:	Allgemeine Empfehlung oder Optimales Verfahren
	Bezugnahme auf weitere Dokumente

HINWEIS:

- Bitte notieren Sie die Adresse und Telefonnummer Ihrer zuständigen Servicestelle in dem unten vorgesehenen Feld. Benachrichtigen Sie ihn im Fall einer Panne, und versuchen Sie, alle relevanten Einzelheiten anzugeben, damit Ihnen rasch geholfen werden kann.
- Die Rollstühle, die in diesem Handbuch abgebildet und beschrieben sind, entsprechen möglicherweise nicht in allen Einzelheiten genau Ihrem eigenen Modell. Dennoch sind alle Anweisungen trotz möglicher Detailunterschiede völlig relevant.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Gewichte, Abmessungen oder andere in diesem Handbuch aufgeführte technische Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern. Alle in diesem Handbuch aufgeführten Zahlenangaben, Abmessungen und Kapazitäten sind ungefähr und stellen keine präzisen technischen Daten dar.

1.0 R-net Steuersystem	5
2.0 Garantie	6
2.0 Garantie	6
3.0 Das R-net Steuersystem	8
3.0 Einführung	8
3.1 R-net Joystick-Module	9
3.2 Joystick-Modul mit LCD-Anzeige (Fig. 3.3)	9
3.3 Joystick-Modul mit LED-Tasten (Fig. 3.5)	11
4.0 Das R-net Joystick-Modul mit LCD-Anzeige	13
4.0 LCD-Anzeige	13
4.1 Hauptanzeigefeld: Die Fahranzeige	14
4.2 Hauptanzeigefeld: Modusanzeigen	15
4.3 Hauptanzeigefeld: Diagnose (Fig. 4.24)	17
4.4 Sperren des Joystick-Moduls (Fig. 4.26 - 4.29)	18
4.4 Seite zur Auswahl des Verstellmotors	19
5.0 Das R-net Joystick-Modul mit LED-Anzeige	20
5.1 LED-Statusanzeige für das Steuersystem	20
5.2 Leitfaden zur Selbsthilfe	21
6.0 Vorbereitung auf das Fahren	23
6.1 Vorbereitung auf das Fahren	23
6.2 Bedienung des Steuersystems	24
7.0 Einstellungs Menü	25
7.1 Einstellungs Menü	25
7.2 Zeit einstellen	25
7.3 Zeit anzeigen	26
7.4 Strecke	27
7.5 Einstellungen anzeigen	28
8.0 Die Batterieanzeige	29
8.1 Ablesen der Batterieanzeige	29
9.0 Ladebuchse	30
9.1 Batterien aufladen	30
10.0 Modul für Dualsteuerung/Steuerung durch Begleitperson	31
10.1 Joystick	31
10.2 Anzeige Höchstgeschwindigkeit	31
10.3 Taste zur Erhöhung / Verringerung der Geschwindigkeit	31
10.4 Modustaste	31
10.5 Kontrollanzeige	31
10.6 Kontrollschalter	31
10.7 Pflege	32
10.8 Tägliche Überprüfungen	32
10.9 Wöchentliche Überprüfungen	32
11.0 Vorkehrungen für die Benutzung	32
11.1 WARNUNGEN:	32
11.2 Sicherheitsprüfungen	33
11.3 Service	33

1.0 R-net Steuersystem

Hier bei Sunrise Medical möchten wir natürlich, dass Sie Ihren Rollstuhl optimal nutzen. Diese Gebrauchsanweisung soll Sie mit den R-net Steuerungen und seinen Eigenschaften vertraut machen. Es enthält Anweisungen über den täglichen Gebrauch und die allgemeine Wartung sowie Informationen über den hohen Qualitätsstandard, an den wir uns halten, und Einzelheiten über die Garantie.

Sie erhalten das R-net Steuersystem in perfektem Zustand, nachdem es vor dem Versand persönlich überprüft worden ist. Wenn Sie die Wartungsanweisungen befolgen, bleibt die erstklassige Kondition erhalten und es bietet Ihnen über Jahre hinweg Zuverlässigkeit und Zufriedenheit.

Ihre Steuerung ist mit umfassenden Fahrprofilen eingerichtet und ist einsatzbereit. Das R-net System verfügt über eine große Auswahl von Fahrprofilen, Modulen und Einstellmöglichkeiten. Für weitere Informationen über diese wenden Sie sich bitte an Ihren Sunrise Medical Fachhändler.

Das R-net Steuersystem ist für eine effiziente, flexible und einfache Bedienung konzipiert. Wenn Sie das System noch nicht kennen, ist es wichtig, dass Sie das Fahren und Steuern in einer sicheren Umgebung üben, bis Sie mit der Bedienung vertraut sind.

Sollten Sie Zweifel bezüglich der Eignung des Steuersystems haben, wenden Sie sich an den zuständigen, durch Sunrise Medical autorisierten Fachhändler, um dies vor der Benutzung auf öffentlichen Gehwegen zu klären.

Das R-net System ist voll programmierbar, d.h., das Steuersystem kann durch Programmierung an viele verschiedene Anforderungen angepasst werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie vor dem Durchführen kleinerer Anpassungen die Bedienungsanleitung lesen. Für größere Anpassungen wenden Sie sich einen durch Sunrise Medical autorisierten Fachhändler.

Sollten Sie jedoch noch weitere Fragen bezüglich der Benutzung, der Wartung oder der Sicherheit des Rollstuhls haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Sunrise Medical Kundendienst. Falls es in Ihrer Nähe keinen autorisierten Fachhändler gibt oder Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder telefonisch an:

Sunrise Medical GmbH

Kahlbachring 2-4

69245 Malsch/Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49 7253 980-0

Fax: +49 7253 980-222

kundenservice@sunrisemedical.de

www.SunriseMedical.de

Unterschrift und Stempel des Fachhändlers

2.0 Garantie

2.0 Garantie

IHRE GESETZLICHEN RECHTE SIND DURCH DIESE GARANTIE NICHT EINGESCHRÄNKT.

Sunrise Medical* gewährt seinen Kunden für alle Rollstühle eine Garantie gemäß den nachfolgenden Garantiebedingungen.

Garantiebedingungen:


1. Sollte ein Teil oder sollten Teile des Rollstuhls als Folge eines Herstellungsfehlers innerhalb von 24 Monaten bzw. bei Rahmen- und Kreuzstreben innerhalb von 5 Jahren nach der Auslieferung an den Käufer eine Reparatur oder einen Austausch benötigen, wird das betroffene Teil bzw. werden die betroffenen Teile repariert oder kostenlos ausgetauscht. Die Garantie deckt ausschließlich Herstellungsfehler ab.
2. Zur Geltendmachung der Garantie benachrichtigen Sie bitte umgehend den Sunrise Medical Kundendienst mit einer genauen Beschreibung des Problems. Sollten Sie den Rollstuhl außerhalb des Zuständigkeitsbereichs des Sunrise Medical Kundendienstes verwenden, werden Reparatur oder Austausch von einem anderen, vom Hersteller bezeichneten Kundendienst ausgeführt. Der Rollstuhl muss von einem von Sunrise Medical bezeichneten Kundendienst /Händler repariert werden.
3. Für Teile, die im Rahmen dieser Garantie repariert oder ausgetauscht werden, gewähren wir eine Garantie nach diesen Garantiebedingungen für die für den Rollstuhl verbleibende Garantiedauer nach Ziffer 1.
4. Auf Original-Ersatzteile, die auf Kosten des Kunden eingebaut wurden, wird nach dem Einbau gemäß den Garantiebedingungen eine Garantie von 12 Monaten gewährt.
5. Ansprüche aus dieser Garantie entfallen, wenn eine Reparatur oder ein Ersatz des Rollstuhls oder eines Teiles aus den folgenden Gründen erforderlich ist:
 - a. Normaler Verschleiß an Bauteilen wie beispielsweise Batterien, Armpolster, Sitz- und Rückenbespannung, Polster, Reifen, Bremsen etc.
 - b. Überlastung des Produkts, bitte überprüfen Sie die maximal zulässige Zuladung des Produkts auf dem Typenschild.
 - c. Das Produkt oder das Teil wurde nicht gemäß den in der Betriebsanleitung und/oder dem Service-Handbuch aufgeführten Empfehlungen des Herstellers gepflegt oder gewartet.
 - d. Es wurde Zubehör verwendet, bei dem es sich nicht um Originalzubehör handelte.
 - e. Der Rollstuhl oder ein Teil des Rollstuhls wurde durch Nachlässigkeit, Unfall oder unsachgemäße Verwendung beschädigt.
 - f. Änderungen/Modifikationen am Rollstuhl oder an Teilen, die von den Herstellerspezifikationen abweichen.
 - g. Es wurden Reparaturen durchgeführt, bevor unser Kundendienst über den jeweiligen Sachverhalt informiert wurde.
6. Diese Garantie unterliegt dem Recht des Landes, in dem das Sunrise Medical* Produkt gekauft wurde.

* Standort von Sunrise Medical, von dem das Produkt gekauft wurde.



LED und CJSM1

Fig. 3.0

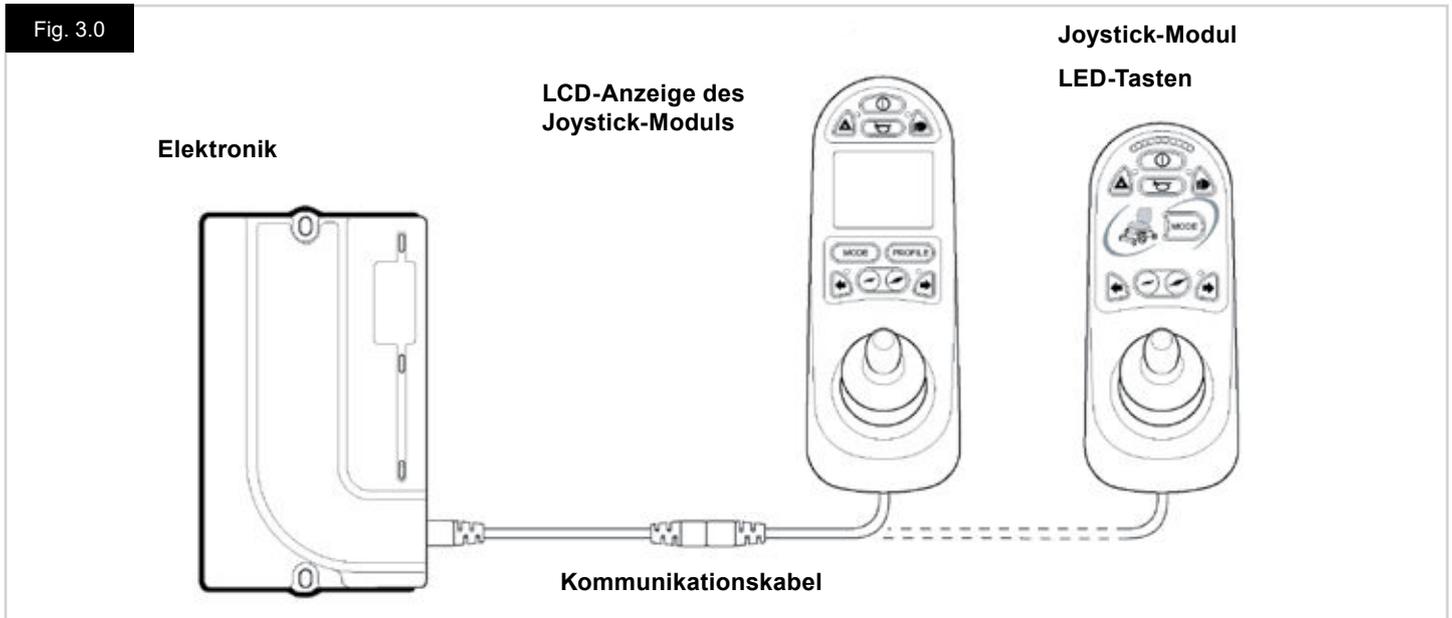

3.0 Einführung

Die Bedienung des R-net Steuersystems für Rollstühle ist einfach und leicht verständlich. Das Steuersystem verfügt über eine hochmoderne Elektronik, das Ergebnis vieler Forschungsjahre, die für eine einfache Bedienung und einen hohen Sicherheitsgrad sorgt. Zusammen mit den anderen elektronischen Geräten wird durch die richtige Handhabung und den ordnungsgemäßen Betrieb der Steuerung die optimale Betriebssicherheit gewährleistet.

Bitte lesen Sie dieses Kapitel sorgfältig durch - es hilft Ihnen dabei, Ihren Rollstuhl betriebssicher und sicher zu erhalten.

Das R-net Steuersystem besteht aus mindestens zwei Modulen - Joystick- Modul und Elektronik. Wegen der modularen Bauweise kann die Tiefe des Steuersystems wesentlich ausgeweitet werden. In Fig. 3.0 wird ein Beispiel für eine Grundausstattung gezeigt.

Vermeiden Sie Schläge gegen Ihre Steuerung, insbesondere gegen den Joystick. Achten Sie beim Fahren darauf, dass Sie mit der Steuerung oder dem Joystick nicht gegen Hindernisse stoßen. Lassen Sie die Steuerung nie fallen.

Vergewissern Sie sich, dass die Steuerung gut geschützt ist, wenn Sie Ihren Rollstuhl transportieren. Vermeiden Sie Schäden an Kabeln.

Zum Lösen der Kommunikationskabel das Steckergehäuse gut festhalten und die Steckverbinder auseinanderziehen. Nicht am Kabel halten oder ziehen. Beim Verbinden und Lösen immer am Stecker festhalten.

Für Ihr Steuersystem verwenden wir Komponenten von Industriequalität, die einen zuverlässigen Betrieb unter vielen verschiedenen Bedingungen gewährleisten. Sie können aber die Zuverlässigkeit Ihres Steuersystems verbessern, wenn Sie den Betrieb unter extremen Bedingungen auf ein Mindestmaß reduzieren.

Achten Sie darauf, dass die Steuerung oder ihre Komponenten nie über längere Zeiträume feuchten Bedingungen ausgesetzt sind. Wenn Ihre Steuerung durch Essensreste oder Getränke verschmutzt wurde, sorgen Sie bitte dafür, dass sie so schnell wie möglich wieder gereinigt wird.

Reinigen Sie das Steuersystem und den Joystick mit einem Tuch, das mit einem verdünnten Reiniger befeuchtet wurde. Lassen Sie beim Reinigen des Joysticks und der Anzeige Vorsicht walten.


Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reiniger auf Alkoholbasis.

⚠️ WARNUNG:

Achten Sie vor dem Reinigen darauf, dass das Steuersystem ausgeschaltet und das Kommunikationskabel ausgesteckt ist (siehe Fig. 3.1).

Wenn das Steuersystem nach dem Anschließen oder Auswechseln einer Systemkomponente eingeschaltet wird, wird der Timer angezeigt, während das System eine Selbstprüfung durchführt und dann wird das Symbol Neustart angezeigt. Schalten Sie das Steuersystem aus und wieder ein.

Fig. 3.1

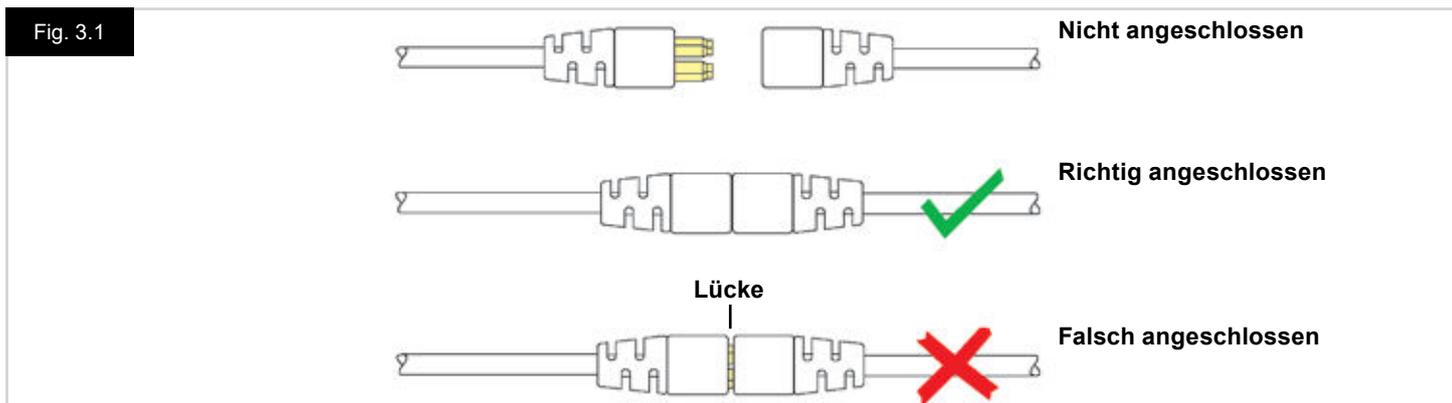

3.1 R-net Joystick-Module

Für das R-net Steuersystem gibt es zwei verschiedene Joystick-Module - mit LCD-Anzeige (Fig. 3.3) und mit LED-Tasten (Fig. 3.5). Die meisten Bedienelemente sind bei beiden gleich, es gibt jedoch ein paar Unterschiede. Die Bedienelemente werden in diesem Abschnitt einzeln erläutert.

3.2 Joystick-Modul mit LCD-Anzeige (Fig. 3.3)

Ein-/Aus-Taste

Mit der Ein-/Aus-Taste wird die Elektronik des Steuersystems mit Strom versorgt, die dann die Rollstuhlmotoren mit Strom versorgt. Verwenden Sie die Ein-/Aus-Taste nicht zum Anhalten des Rollstuhls, außer in Notfällen. (Dadurch kann die Lebensdauer der Fahrkomponenten des Rollstuhls verkürzt werden).

Hupentaste

Wenn diese Taste gedrückt wird, ertönt die Hupe.

Taste zur Verringerung der Geschwindigkeit

Mit dieser Taste wird die Höchstgeschwindigkeit reduziert.

Taste zur Erhöhung der Geschwindigkeit

Mit dieser Taste wird die Höchstgeschwindigkeit erhöht.

Modustaste

Mit der Modustaste kann der Benutzer durch die verfügbaren Betriebsmodi für das Steuersystem navigieren. Die verfügbaren Modi sind von der Programmierung und der Auswahl der zusätzlichen Ausgabegeräte abhängig, die an das Steuersystem angeschlossen sind.

Profiltaste

Mit der Modustaste kann der Benutzer durch die verfügbaren Profile für das Steuersystem navigieren. Die Anzahl der verfügbaren Profile hängt davon ab, wie das Steuersystem programmiert ist.

Taste und LED für Warnblinkanlage

Mit dieser Taste wird die Warnblinkanlage des Rollstuhls aktiviert und deaktiviert. Drücken Sie die Taste, um die Warnblinkanlage einzuschalten und drücken Sie die Taste erneut, um die wieder auszuschalten. Wenn die Warnblinkanlage aktiviert ist, blinken die LED und die LED für die Blinker synchron mit den Blinkern des Rollstuhls.

Taste und LED für Beleuchtung

Mit dieser Taste wird die Beleuchtung des Rollstuhls aktiviert und deaktiviert. Drücken Sie die Taste, um die Beleuchtung einzuschalten und drücken Sie die Taste erneut, um die wieder auszuschalten. Wenn die Beleuchtung aktiviert ist, leuchtet die LED für die Beleuchtung auf.

Taste und LED für linken Blinker

Mit dieser Taste wird der linke Blinker des Rollstuhls aktiviert und deaktiviert. Drücken Sie die Taste, um den Blinker einzuschalten und drücken Sie die Taste erneut, um ihn wieder auszuschalten. Wenn der Blinker aktiviert ist, blinkt die LED für den linken Blinker synchron mit dem(n) Blinker(n) des Rollstuhls.

Taste und LED für rechten Blinker

Mit dieser Taste wird der rechte Blinker des Rollstuhls aktiviert und deaktiviert. Drücken Sie die Taste, um den Blinker einzuschalten und drücken Sie die Taste erneut, um ihn wieder auszuschalten. Wenn der Blinker aktiviert ist, blinkt die LED für den rechten Blinker synchron mit dem(n) Blinker(n) des Rollstuhls.

Buchse für externen Ein-/Aus-Schalter

Damit kann der Benutzer das Steuersystem mit Hilfe eines externen Geräts wie etwa einem Buddy Button ein- und ausschalten.

Buchse für externes Eingabegerät für das Profil (Fig. 3.2 + 3.4)

Dabei handelt es sich um eine Stereo-Buchse, die den Anschluss von zwei externen Schaltern oder Knöpfen über einen passenden Adapter ermöglicht. Die Funktion dieser Schalter oder Tasten kann durch Programmierung zugeordnet werden. Bitte wenden Sie sich dazu an Ihren Kundendienst.

Details zum Anschließen des Stereo-Gegensteckers finden Sie in der folgenden Abbildung.

Wenn das Steuersystem auf Fahren im Dauerkontaktmodus oder Steuerung der Verstellmotoren im Dauerkontaktmodus eingestellt ist, übernimmt dieser angeschlossene Schalter die Funktion des Not-Aus-Schalters.

Mit dem Joystick-Modul werden Gummistopfen mitgeliefert, die in die Buchsen eingesteckt werden müssen, wenn kein externes Gerät angeschlossen ist.

Weitere Informationen zu den Funktionen der LCD-Anzeige finden Sie in Kapitel 4.0

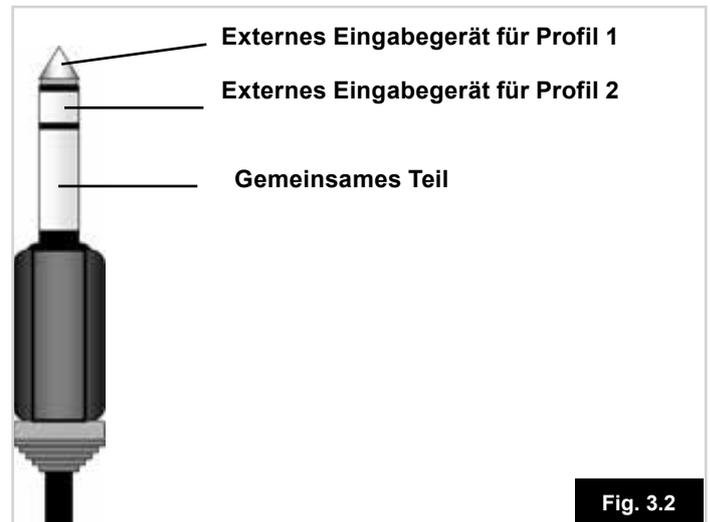


Fig. 3.3

Joystick-Modul mit LCD-Anzeige

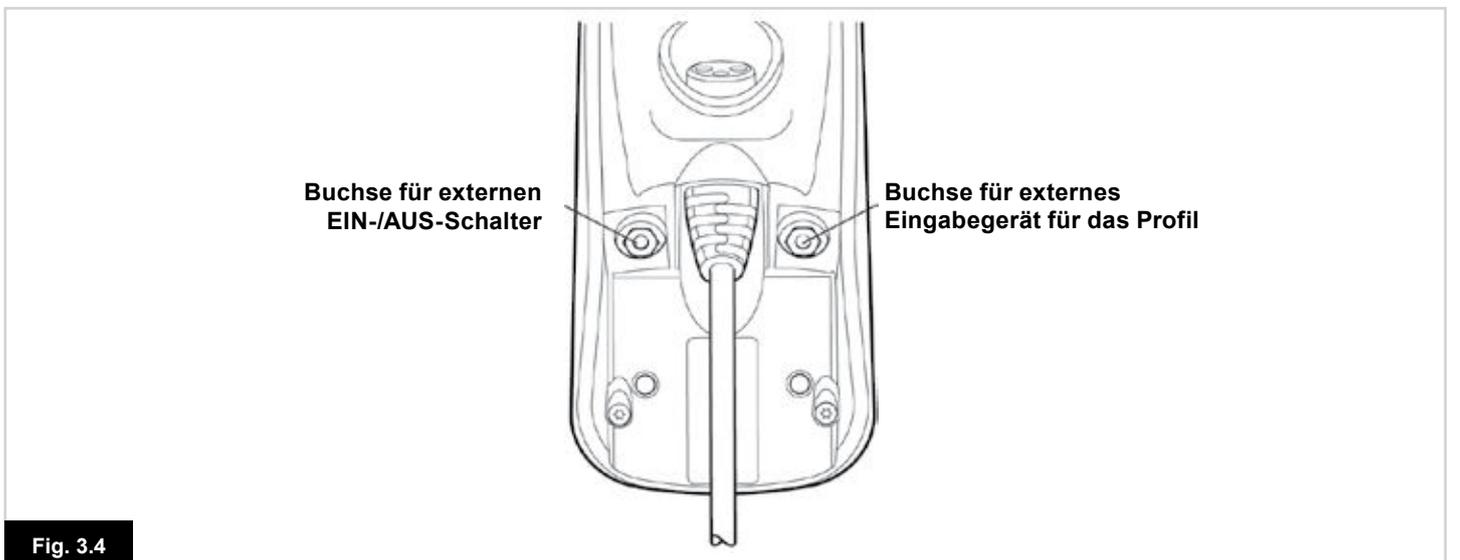


Fig. 3.4

3.3 Joystick-Modul mit LED-Tasten (Fig. 3.5)

Batterieladungsanzeige

An der Batterieanzeige sehen Sie, dass der Rollstuhl eingeschaltet ist. Sie zeigt auch den Betriebsstatus des Rollstuhls an. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 5.0.

Wenn die Batterieanzeige rot, gelb und grün anzeigt, werden die Batterien aufgeladen. (LED 1 – 10)

Wenn die Batterieanzeige nur rot und gelb anzeigt, sollten die Batterien so bald wie möglich aufgeladen werden. (LED 1 – 7)

Wenn die Batterieanzeige nur rot anzeigt oder langsam rot blinkt, müssen die Batterien sofort aufgeladen werden. (LED 1 – 3)

Bedienen Sie das Steuersystem nicht, wenn die Batterie fast leer ist. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann dazu führen, dass der Benutzer in einer gefährlichen Lage festsetzt, zum Beispiel mitten auf der Straße. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.

Siehe Abschnitt 5.0 für weitere Informationen.

Anzeige Höchstgeschwindigkeit / Profil

Mit dieser Anzeige wird die eingestellte Höchstgeschwindigkeit für den Rollstuhl angezeigt oder das ausgewählte Fahrprofil, wenn das Steuersystem für den Betrieb mit Fahrprofil programmiert wurde.

Mit dieser Anzeige wird auch angezeigt, ob die Geschwindigkeit des Rollstuhls beschränkt wird oder ob das Steuersystem gesperrt ist, siehe Abschnitt 5.21

Anzeige für Höchstgeschwindigkeit

Wenn diese Anzeige zum Anzeigen der Geschwindigkeit programmiert wurde, wird damit die Einstellung für die Höchstgeschwindigkeit des Rollstuhls angezeigt. Es gibt fünf Einstellungen für die Geschwindigkeit – Schritt 1 (1 LED) ist die niedrigste Geschwindigkeit und Schritt 5 (5 LED) ist die höchste Geschwindigkeit.

Profilanzeige

Wenn Display-Profile programmiert wurden, wird damit das ausgewählte Fahrprofil angezeigt. Es können bis zu 5 Fahrprofile verfügbar sein; dies ist von der Programmierung des Steuersystems abhängig. Fahrprofile können in die Steuerung programmiert werden. Ein Steuersystem mit JSM-LED sollte nur mit 5 aktivierten Profilen programmiert werden. Für weitere Informationen zur Programmierung wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Taste Geschwindigkeit / Profil verringern

Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Höchstgeschwindigkeit verringert oder wenn das Steuersystem auf den Betrieb mit Fahrprofil programmiert ist, wird ein niedrigeres Fahrprofil ausgewählt.

Taste Geschwindigkeit/ Profil erhöhen

Wenn diese Taste gedrückt wird, wird die Höchstgeschwindigkeit erhöht oder wenn das Steuersystem auf den Betrieb mit Fahrprofil programmiert ist, wird ein höheres Fahrprofil ausgewählt.

Modustaste

Mit der Modustaste kann der Benutzer durch die verfügbaren Betriebsmodi für das Steuersystem navigieren. Die verfügbaren Modi sind von der Programmierung und der Auswahl der zusätzlichen Ausgabegeräte abhängig, die an das Steuersystem angeschlossen sind.

In allen anderen Modi außer im Fahr- und Sitzmodus sind die LEDs für Geschwindigkeit und Verstellmotor alle erloschen.

Verstellmotoranzeige

Mit dieser Gruppe von LEDs wird angezeigt, welcher Verstellmotorkanal gerade gesteuert wird, wenn sich das Steuersystem im Verstellmotor-Modus befindet. Auswahl und Bedienung des Verstellmotors erfolgt über den Joystick.

Mit Bewegungen nach links oder rechts werden unterschiedliche Verstellmotorkanäle ausgewählt.

Mit Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen werden die ausgewählten Verstellmotoren bewegt.

Ladebuchse (Fig. 3.6)

Diese Buchse darf nur zum Aufladen des Rollstuhls verwendet werden. An diese Buchse dürfen keine Programmierkabel angeschlossen werden.

Siehe Abschnitt 9.0 für weitere Informationen zu Aufladen.

Diese Buchse darf nicht als Stromversorgung für andere elektrische Geräte verwendet werden. Wenn andere elektrische Geräte angeschlossen werden, kann dadurch das Steuersystem beschädigt oder die EMV des Rollstuhls beeinträchtigt werden.

Die Garantie für das Steuersystem wird ungültig, wenn andere Geräte als das mitgelieferte Batterieladegerät an diese Buchse angeschlossen werden.

Zuordenbare Tasten

Die Funktionen der meisten Tasten können durch Programmieren geändert werden. Dazu gehört die Zuordnung der Funktion einer anderen Taste oder das Einrichten der Taste als Schnelltaste für einen bestimmten Vorgang wie etwa das Bewegen einer Sitzfunktion. Dazu kann einer Taste auch eine zweite Funktion zugeordnet werden, der Zugang erfolgt über das Drücken der Taste für eine bestimmte Zeit.

Für weitere Informationen zum Ändern der Funktion einer Taste und der Zuordnung einer zweiten Funktion wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Fig. 3.5

Joystick-Modul mit LED-Tasten



Fig. 3.6

Ladebuchse (an der Unterseite)

4.0 Das R-net Joystick-Modul mit LCD-Anzeige



Fig. 4.0

- A. Obere Leiste
- B. Hauptanzeigefeld:
- C. Hauptanzeige:

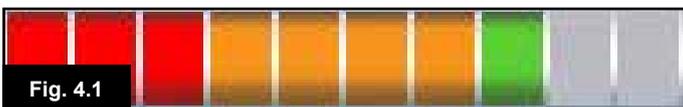


Fig. 4.1



Fig. 4.2



Fig. 4.3



Fig. 4.4



Fig. 4.5

4.0 LCD-Anzeige

Der Status des Steuersystems ist aus der LCD-Anzeige ersichtlich.

Die farbige LCD-Anzeige ist in 3 Informationsbereiche aufgeteilt. Die obere Leiste, die untere Leiste und die Hauptanzeige.

Die einzelnen Bereiche werden in diesem Abschnitt separat behandelt.

Obere Leiste

Balken für Batterieladestand + Borddiagnose.

Batterieanzeige (Fig. 4.1)

Damit wird der Ladestand der Batterie angezeigt. Sie kann dazu verwendet werden, um den Benutzer auf den Status der Batterie aufmerksam zu machen.

Konstant: Damit wird angezeigt, dass alles in Ordnung ist. Blinkt langsam: Das Steuersystem funktioniert richtig, Sie sollten die Batterie aber so bald wie möglich aufladen.

Lauflicht: Die Rollstuhlbatterien werden aufgeladen. Sie können erst wieder mit dem Rollstuhl fahren, wenn Sie das Ladegerät ausgesteckt und das Steuersystem aus- und wieder eingeschaltet haben.

Siehe Abschnitt 8.1 für eine Beschreibung zum Ablesen der Batterieanzeige.

Steuerung (Fig. 4.2)

Wenn das Steuersystem mehr als eine Methode der Direktsteuerung enthält wie etwa ein sekundäres Joystick-Modul oder ein Modul mit Dualsteuerung/Steuerung für Begleitperson, zeigt das Modul, das den Rollstuhl steuert, das Symbol Steuert (In Focus) an.

Untere Leiste

Aktuelles Profil (Fig. 4.3)

Das derzeit ausgewählte Profil wird in numerischer Form angezeigt.



Motortemperatur (Fig. 4.4)

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Steuersystem absichtlich die Stromzufuhr zu den Motoren reduziert hat, um sie gegen Schäden durch Überhitzung zu schützen.

Temperatur des Steuersystems (Fig. 4.5)

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Steuersystem absichtlich seine eigene Stromzufuhr reduziert hat, um sich gegen Schäden durch Überhitzung zu schützen.

Fig. 4.6 Fahren im Haus

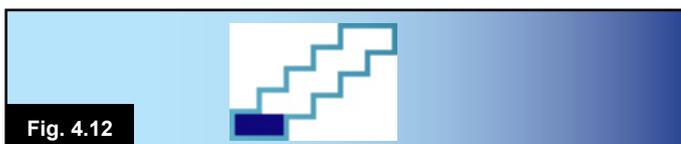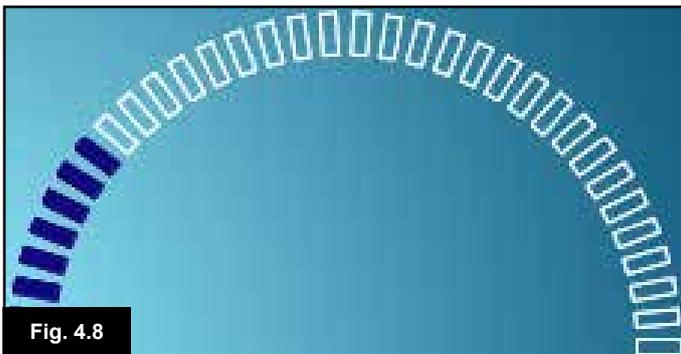

4.1 Hauptanzeigefeld: Die Fahranzeige

Profilname (Fig. 4.6)

Eine Textfolge, die den Namen des derzeit ausgewählten Profils anzeigt.

Uhr (Fig. 4.7)

Damit wird die aktuelle Zeit in einem numerischen Format angezeigt.

Die Uhr kann vom Benutzer eingestellt werden. Es gibt die folgenden Möglichkeiten:

- Sichtbarkeit, ob die Uhr auf der Anzeige erscheint.
- Das Anzeigeformat, 12 oder 24 Stunden.
- Die Uhrzeit, der Benutzer kann die Uhrzeit verstellen.

Diese Anpassungen werden im Menü Einstellungen vorgenommen. Siehe Kapitel 7.0 für weitere Informationen

Geschwindigkeitsanzeige (Fig. 4.8)

Die proportionale Anzeige der Geschwindigkeit des Rollstuhls. Der Bogen beginnt mit 0%, das Maximum lautet 100%.

Anzeige der Höchstgeschwindigkeit (Fig. 4.9)

Damit wird die aktuelle Einstellung für die Höchstgeschwindigkeit angezeigt.

Digitale Geschwindigkeitsanzeige (Fig. 4.10)

Damit wird die tatsächliche Geschwindigkeit des Rollstuhls angezeigt, die von den Motoren stammt. Die Anzeige kann auf mph (Meilen pro Stunde) oder km/h eingestellt werden.

Kilometerzähler (Fig. 4.11)

Damit wird die vom Rollstuhl zurückgelegte Entfernung angezeigt. Die Anzeige kann entweder die gesamte Entfernung oder die Tagesstrecke in Meilen oder Kilometern anzeigen. Das Menü Einstellungen enthält eine Option, mit der eingestellt wird, ob die Tagesstrecke oder die gesamte Entfernung angezeigt wird sowie die Möglichkeit, die Tagesstrecke auf 0 zurückzusetzen.

Wenn der Betrieb im Dauerkontakt aktiviert ist, hat dieses Symbol Vorrang gegenüber dem Kilometerzähler.

Dauerkontakt (Fig. 4.12)

Wenn das Steuersystem im Dauerkontakt betrieben wird, wird dieses Symbol angezeigt.

Sperre (Fig. 4.13 und 4.14)

Wenn die Geschwindigkeit des Rollstuhls beschränkt wird, zum Beispiel durch einen hochgestellten Sitz, wird dieses orange Symbol angezeigt.

Wenn eine Fahrsperrung des Rollstuhls besteht, blinkt dieses rote Symbol auf.



4.2 Hauptanzeigefeld: Modusanzeigen

Durch Drücken der MODUSTASTE haben Sie Zugang zu verschiedenen Funktionen. Beispiele dafür sind der Fahrmodus und die Modi Sitzsteuerung und Bluetooth. Der Benutzer kann den gewünschten Modus mit der Modustaste am JSM auswählen. Bitte beachten Sie: Ein Modus kann nur ausgewählt werden, wenn ein Modul an das System angeschlossen ist, das diesen Modus unterstützt. Wenn zum Beispiel kein Maus-Modul angeschlossen ist, kann der Benutzer diesen Modus nicht auswählen.


Verstellmotor-Modus (Fig. 4.15)

Damit werden die Bereiche des Rollstuhls angezeigt, die derzeit zur Bewegung ausgewählt sind, der Name für die Auswahl und ein Richtungspfeil, der anzeigt, welche Bewegung verfügbar ist.




Bluetooth-Modus, Maus (Fig. 4.16)

Beim Wechsel in den Bluetooth-Modus erscheint die folgende Anzeige.

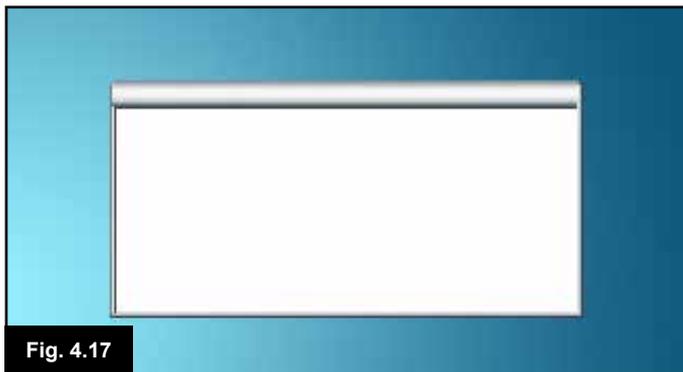

Meldungsfenster (Fig. 4.17)

R-net zeigt Warnsymbole und Meldungen in einem eigenen Meldungsfenster an.

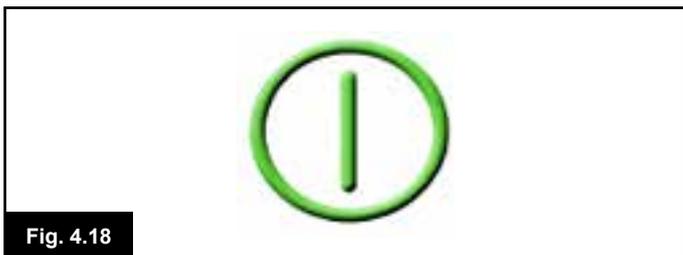

Neustart (Fig. 4.18)

Wenn das Steuersystem neu gestartet werden muss wie etwa nach der Neukonfigurierung eines Moduls, blinkt dieses Symbol auf.




Timer

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Steuersystem zwischen verschiedenen Zuständen wechselt. Ein Beispiel wäre etwa das Wechseln in den Programmiermodus. Es handelt sich um ein Symbol mit Animation, eine rieselnde Sanduhr.



Standby (Fig. 4.20)

Dieses Symbol erscheint kurz bevor das R-net in den Standby-Status wechselt.

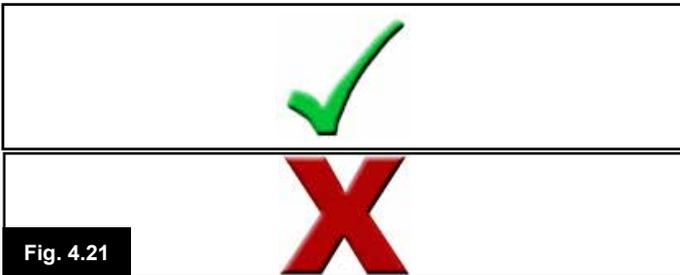


Kreuz + Haken (Fig. 4.21)

Diese Symbole werden während der Konfigurationsvorgänge angezeigt.


1. Prozess richtig abgeschlossen.

2. Prozess nicht richtig abgeschlossen.

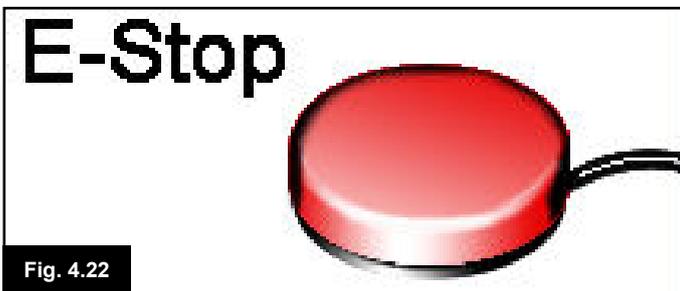

Not-Aus-Taste (Fig. 4.22)

Wenn das externe Eingabegerät für das Profil während der Fahrt oder beim Betrieb des Verstellmotors aktiviert wird, wird dieses Symbol angezeigt.

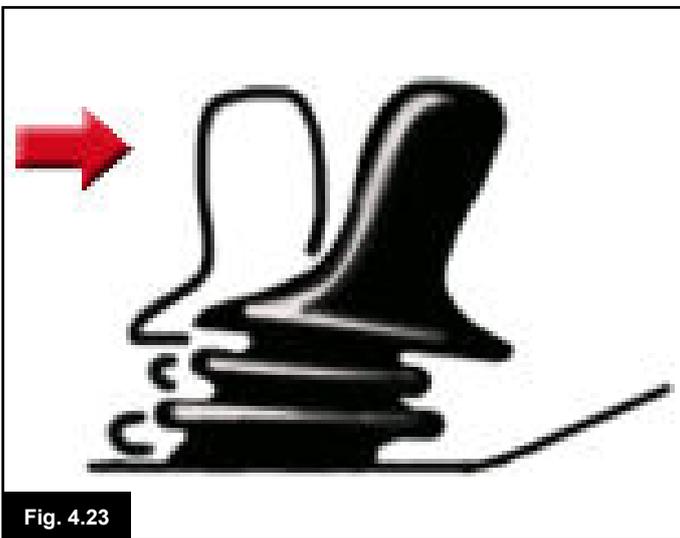

Joystick nicht in Grundstellung (Fig. 4.23)

Wenn Sie den Joystick vor oder gleich nach dem Einschalten des Steuersystems betätigen, erscheint die Anzeige Joystick nicht in Grundstellung (Joystick displaced).

Sie müssen den Joystick loslassen und wieder in die Mittelstellung bringen, damit der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Wenn Sie den Joystick nicht innerhalb von fünf Sekunden loslassen, kann der Rollstuhl nicht fahren, auch wenn Sie den Joystick loslassen und wieder bewegen. Auf der Anzeige erscheint dann eine Diagnosesseite. Um die Anzeige zurückzusetzen, schalten Sie das Steuersystem aus und wieder ein.



4.3 Hauptanzeigefeld: Diagnose (Fig. 4.24)

Wenn die Sicherheitsstromkreise des Steuersystems aktiviert wurden und das Steuersystem die Fahrt des Rollstuhls gesperrt hat, wird eine Diagnoseseite angezeigt.

Das zeigt eine Abschaltung des Systems an, d.h., R-net hat einen Fehler in der Elektrik des Rollstuhls festgestellt. Wenn der Fehler in einem Modul auftritt, das nicht aktiv ist, wie zum Beispiel im Intelligenten Sitzmodul, aber ein Fahrprofil ausgewählt ist, dann kann noch gefahren werden. Die Diagnoseseite erscheint jedoch in regelmäßigen Abständen.

Anzeigebereich Fig. 4.24

A. Abschaltungscode

Der angezeigte 4-stellige Code zeigt die genaue Abschaltung an, die aufgezeichnet wurde.

B. Ermitteltes Modul

Damit wird angezeigt, in welchem Modul des Steuersystems das Problem registriert wurde:

- PM = Elektronik
- JSM = Bedienpult (Steuerung)
- ISM = Intelligentes Sitz-/Licht-Modul

C. Abschaltungstext

Der Abschaltungstext liefert eine Kurzbeschreibung des Abschaltungstyps.

Diagnoseverfahren (Fig. 4.25) (Beispiel)

Das ermittelte Modul, (PM):	= Die Elektronik
Abschaltungstext:	= Batterieladestand niedrig
Abschaltungscode:	= 2C00

Das bedeutet, dass die Batterie aufgeladen werden muss oder es liegt eine mangelhafte Verbindung zur Batterie vor. Überprüfen Sie die Anschlüsse zur Batterie. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, versuchen Sie, die Batterie aufzuladen.

Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Lesen und beachten Sie den angezeigten Abschaltungstext, das ermittelte Modul und den Abschaltungscode.
- Schalten Sie das Steuersystem aus.
- Überprüfen Sie, dass alle Steckverbinder für das aufgeführte Modul und den Rollstuhl fest sitzen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Batterie.
- Beachten Sie die Beschreibung des Abschaltungstexts.
- Schalten Sie das Steuersystem wieder ein und versuchen Sie, mit dem Rollstuhl zu fahren. Wenn die Sicherheitsstromkreise erneut aktiviert werden, schalten Sie aus und benutzen Sie den Rollstuhl nicht mehr.
- Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

4.4 Sperren des Joystick-Moduls (Fig. 4.26 - 4.29)

Zum Sperren des Rollstuhls:

- Bei eingeschaltetem Steuersystem (Fig. 4.26) die Ein-/Aus-Taste drücken und halten.
- Nach 1 Sekunde piepst das Steuersystem und die Anzeige erlischt (Fig. 4.27). Lassen Sie jetzt die Ein-/Aus-Taste los
- Bewegen Sie den Joystick nach vorne, bis das Steuersystem piepst.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis das Steuersystem piepst.
- Lassen Sie den Joystick los, es ertönt ein langer Piepston.
- Der Rollstuhl ist jetzt gesperrt.
- Das folgende Symbol wird angezeigt (Fig. 4.28), wenn das Steuersystem wieder eingeschaltet wird.
- Wenn ein Joystick-Modul mit LED-Anzeige eingebaut ist, findet an den LEDs für die Geschwindigkeitsanzeige ein Lichtlauf statt.
- So heben Sie die Sperre wieder auf:
- Wenn das Steuersystem ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Das Symbol "Gesperrt" wird angezeigt (Fig. 4.28).
- Bewegen Sie den Joystick nach vorne, bis das Steuersystem piepst.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis das Steuersystem piepst.
- Lassen Sie den Joystick los. Ein langer Piepston ertönt und die Anzeige wird beleuchtet (Fig. 4.29).
- Die Sperre des Rollstuhls ist jetzt aufgehoben.



Fig. 4.26



Fig. 4.27



Fig. 4.28



Fig. 4.29





4.4 Seite zur Auswahl des Verstellmotors

Der Zugang erfolgt über die MODUS-Taste. Zum Einstellen der Sitzposition muss die Seite für den Verstellmotor angezeigt werden. Drücken Sie die Modustaste und scrollen Sie durch die Modusseiten, bis Sie zur Seite mit den Verstellmotoren gelangen (Fig. 4.30).

Das Einstellen der Verstellmotoren wird wie folgt durchgeführt.


- Bewegen Sie den Joystick zur Auswahl der gewünschten Achse seitwärts nach links oder rechts (Fig. 4.31). Die Achse wird durch den markierten Bereich des Rollstuhls angezeigt (Fig. 4.32).
- Bewegen Sie den Joystick nach vorne oder hinten, um den ausgewählten Verstellmotor entsprechend zu bewegen (Fig. 4.33).
- Wiederholen Sie diese Schritte für alle Verstellmotoren, die eingestellt werden müssen.
- Um wieder zu fahren, drücken Sie die Modus-Taste, bis Sie zur Seite Fahren gelangen oder beim Joystick-Modul mit LED-Anzeige, bis die Geschwindigkeitsanzeige in den normalen Status zurückkehrt.

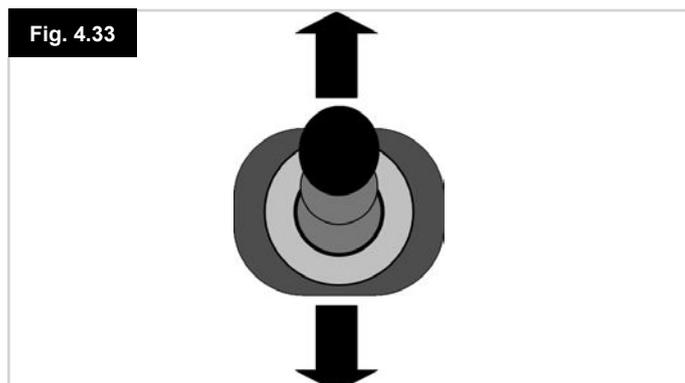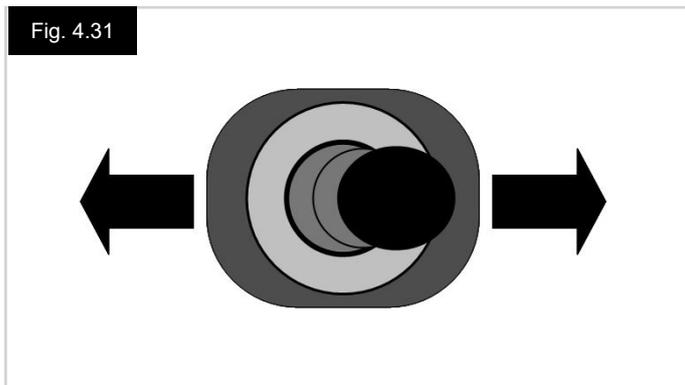

5.0 Das R-net Joystick-Modul mit LED-Anzeige


5.1 LED-Statusanzeige für das Steuersystem

Die Batterieanzeige und die Anzeige Höchstgeschwindigkeit/ Profil zeigen den Status des Steuersystems an. Mit Hilfe dieses Kapitels kann eine Diagnose für Probleme erstellt werden, die zuerst schlimm erscheinen, aber oft nur eine einfache Ursache haben und einfach zu beheben sind.

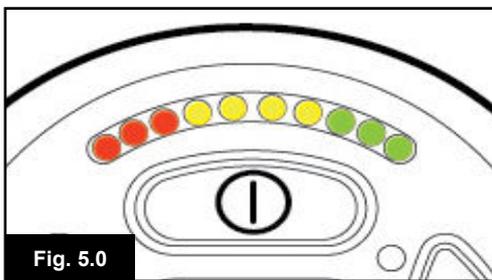


Batterieanzeige leuchtet konstant (Fig. 5.0)

Damit wird angezeigt, dass alles in Ordnung ist.

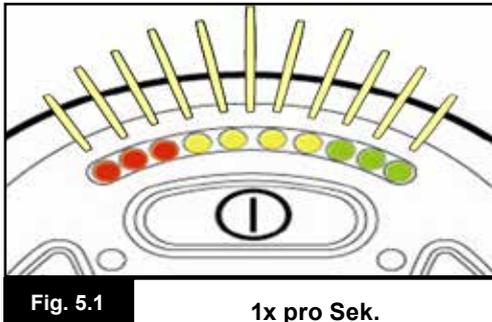


Batterieanzeige blinkt langsam (Fig. 5.1)

Das Steuersystem funktioniert richtig, Sie sollten die Batterie aber so bald wie möglich aufladen.

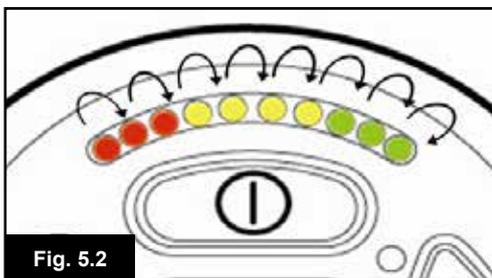

Batterieanzeige blinkt schnell (Fig. 5.2)


Die Rollstuhlbatterien werden aufgeladen. Sie können erst wieder mit dem Rollstuhl fahren, wenn Sie das Ladegerät ausgesteckt und das Steuersystem aus- und wieder eingeschaltet haben.

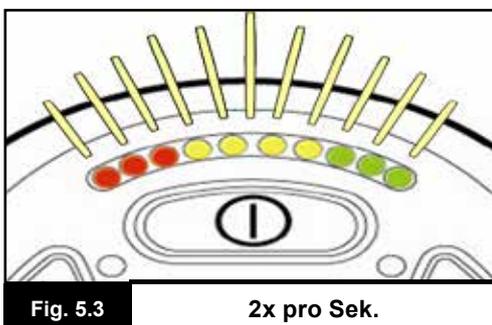

Batterieanzeige blinkt schnell (auch bei losgelassenem Joystick) (Fig. 5.3)


Die Sicherheitsstromkreise des Steuersystems wurden aktiviert und das Steuersystem hat die Fahrt des Rollstuhls gesperrt. Das zeigt eine Abschaltung des Systems an, d.h., R-net hat einen Fehler in der Elektrik des Rollstuhls festgestellt. Bitte gehen Sie wie folgt vor:

- Schalten Sie das Steuersystem aus.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Steckverbinder am Rollstuhl und das Steuersystem fest sitzen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Batterie.
- Wenn Sie den Fehler nicht finden, versuchen Sie es mit dem Leitfaden zur Selbsthilfe auf der nächsten Seite, Abschnitt 5.6 bis 5.22.
- Schalten Sie das Steuersystem wieder ein und versuchen Sie, mit dem Rollstuhl zu fahren. Wenn die Sicherheitsstromkreise erneut aktiviert werden, schalten Sie aus und benutzen Sie den Rollstuhl nicht mehr.
- Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

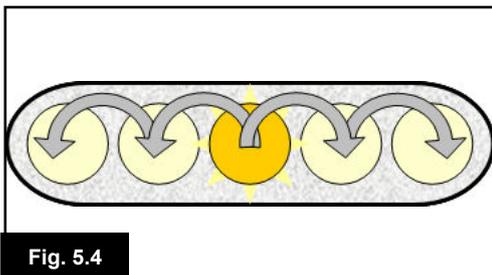

Lichtlauf von der Mitte nach außen bei Geschwindigkeitsanzeige (Fig. 5.4)

In diesem Fall findet ein Lichtlauf der LEDs statt von der mittleren LED ausgehend an beiden Seiten nach außen. Das Steuersystem hat festgestellt, dass ein neues Modul hinzugefügt wurde und konfiguriert sich neu. Bitte warten Sie ein paar Sekunden, bis das abgeschlossen ist

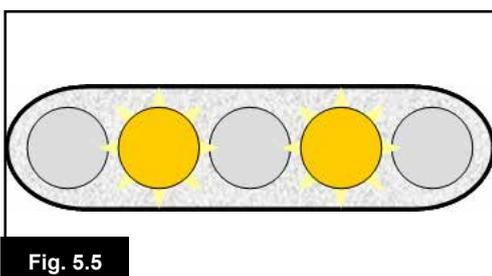

2. + 4. LED für Geschwindigkeitsanzeige blinken (Fig. 5.5)

Wenn ein Neustart des Steuersystems erforderlich ist, zum Beispiel nach der Neukonfiguration eines Moduls, blinken die zweite und die vierte LED für die Geschwindigkeitsanzeige.

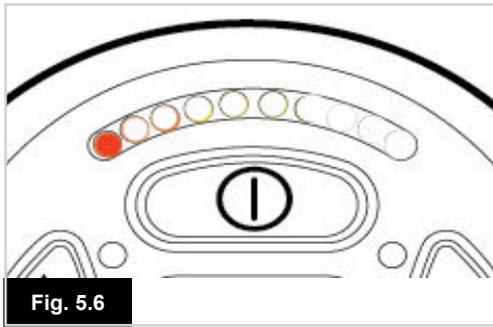


Fig. 5.6

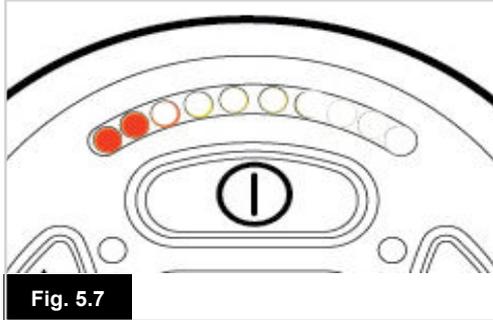


Fig. 5.7

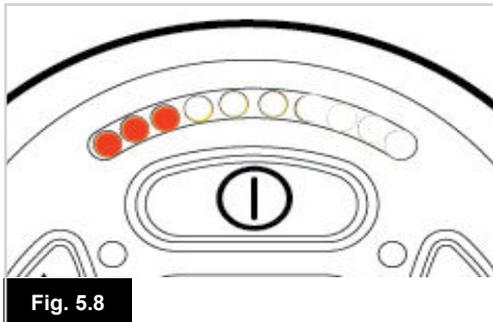


Fig. 5.8

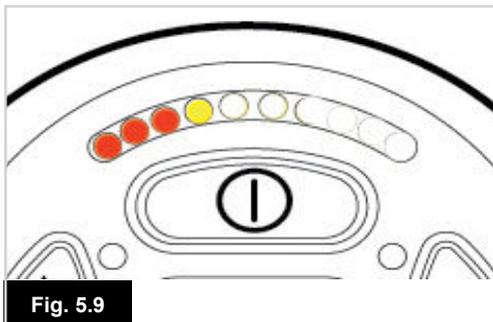


Fig. 5.9

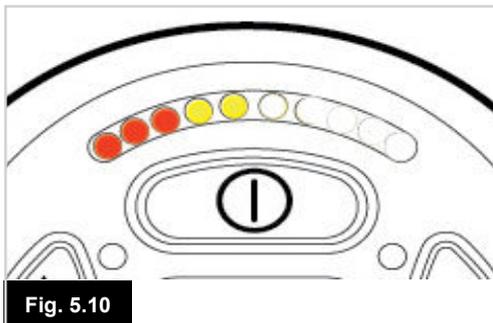


Fig. 5.10

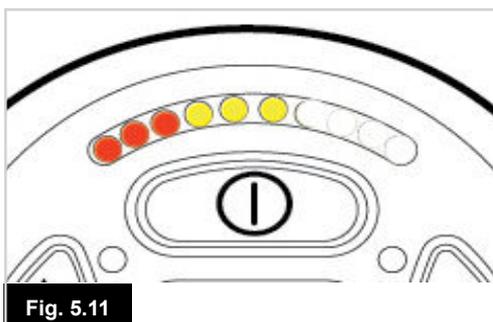


Fig. 5.11

5.2 Leitfaden zur Selbsthilfe

Wenn das System abgeschaltet wird, können Sie anhand der Anzahl der LED, die an der Batterieanzeige blinken, feststellen, was passiert ist.

Hier folgt eine Liste mit Maßnahmen, die Sie selbst durchführen können. Versuchen Sie es zuerst mit dieser Liste, bevor Sie sich an Ihren Kundendienst wenden. Gehen Sie zur Nummer in der Liste, die der Anzahl der blinkenden LED entspricht und folgen Sie den Anweisungen.

Wenn der Fehler weiter besteht, nach dem Sie die im Folgenden beschriebenen Überprüfungen durchgeführt haben, wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

1 LED (Fig. 5.6)

Die Batterie muss aufgeladen werden oder es liegt eine mangelhafte Verbindung zur Batterie vor. Überprüfen Sie die Anschlüsse zur Batterie. Wenn die Anschlüsse in Ordnung sind, versuchen Sie, die Batterie aufzuladen.

2 LED (Fig. 5.7)

Mangelhafter Anschluss am linken Motor*. Überprüfen Sie die Anschlüsse zum linken Motor.

3 LED (Fig. 5.8)

Der linke Motor* hat einen Kurzschluss zu einem Batterieanschluss. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

4 LED (Fig. 5.9)

Mangelhafter Anschluss am rechten Motor*. Überprüfen Sie die Anschlüsse zum rechten Motor.

5 LED (Fig. 5.10)

Der rechte Motor* hat einen Kurzschluss zu einem Batterieanschluss. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

6 LED (Fig. 5.11)

Die Fahrt des Rollstuhls wird durch ein externes Signal verhindert. Die genaue Ursache hängt vom Typ Ihres Rollstuhls ab; eine Möglichkeit ist, dass das Batterieladegerät angeschlossen ist.

7 LED (Fig. 5.12)

Ein Fehler am Joystick wird angezeigt. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Steuersystems, dass sich der Joystick in der Mittelstellung befindet.

8 LED (Fig. 5.13)

Ein möglicher Fehler am Steuersystem wird angezeigt. Überprüfen Sie, dass alle Anschlüsse fest sitzen.

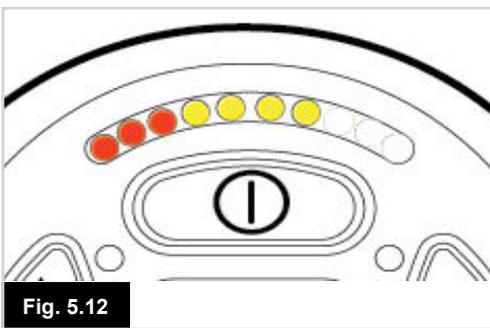


Fig. 5.12

9 LED (Fig. 5.14)

Mangelhafter Anschluss an der Parkbremse. Überprüfen Sie die Parkbremse und die Anschlüsse zum Motor. Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse des Steuersystems fest sitzen.

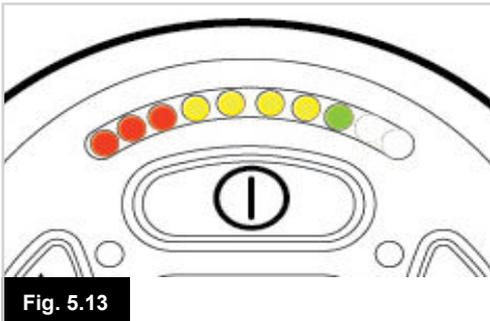


Fig. 5.13

10 LED (Fig. 5.15)

Überspannung am Steuersystem. Das wird normalerweise durch einen mangelhaften Batterieanschluss verursacht. Überprüfen Sie die Batterieanschlüsse.

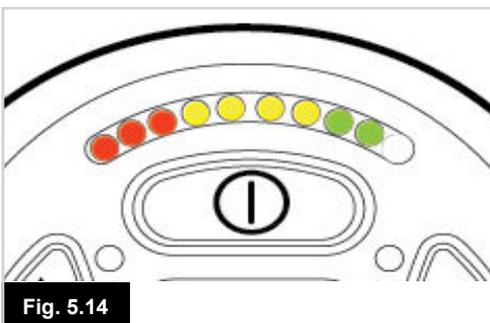


Fig. 5.14

7 LED + LED für Geschwindigkeitsanzeige (Fig. 5.16)

Ein Kommunikationsfehler wird angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass das Joystickkabel fest angeschlossen und nicht beschädigt ist.

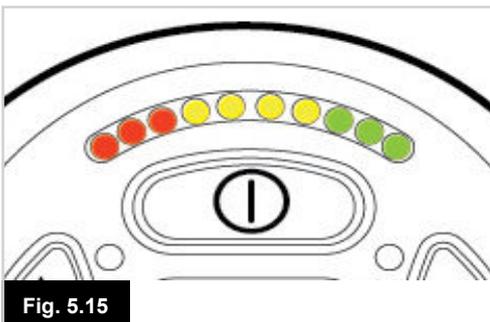


Fig. 5.15

LED für Verstellmotor blinken (Fig. 5.17)

Abschaltung eines Verstellmotors wird angezeigt. Wenn mehrere Verstellmotoren eingebaut sind, überprüfen Sie, welcher Verstellmotor nicht richtig funktioniert. Überprüfen Sie die Kabel des Verstellmotors.

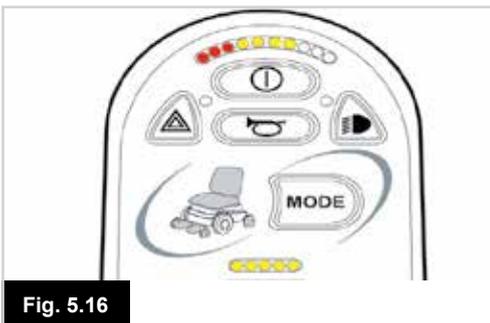


Fig. 5.16

Langsame oder schleppende Fahrt

Wenn der Rollstuhl nicht mit voller Geschwindigkeit fährt oder nicht schnell genug reagiert und die Batterie sich in gutem Zustand befindet, überprüfen Sie die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit. Wenn das Problem nicht durch das Verstellen der Geschwindigkeit behoben wird, kann es sich um einen ungefährlichen Fehler handeln. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

LED für die Geschwindigkeitsanzeige

Die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit wird mit einer zunehmenden Anzahl von LED angezeigt. Wenn zum Beispiel die Einstellung 4 lautet, leuchten die vier linken LED auf.

LED für Profilanzeige

Eine einzelne LED, die aufleuchtet, zeigt das ausgewählte Fahrprofil an. Wenn zum Beispiel Fahrprofil 4 ausgewählt wird, leuchtet nur die vierte LED von links auf.

Anzeige Höchstgeschwindigkeit / Profil - Lichtlauf

Damit wird eine Sperre des Steuersystems angezeigt. Siehe Kapitel 4, Abschnitt 4.32 für weitere Informationen.

Anzeige Höchstgeschwindigkeit / Profil blinkt

Damit wird angezeigt, dass die Geschwindigkeit des Rollstuhls aus Sicherheitsgründen beschränkt wird. Der genaue Grund hängt vom Rollstuhltyp ab. Der häufigste Grund ist jedoch, dass der Sitz elektrisch hochgestellt ist.



Fig. 5.17

6.0 Vorbereitung auf das Fahren

6.1 Vorbereitung auf das Fahren

- Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter. Die Anzeige durchläuft den Initialisierungsvorgang und zeigt dann die Standardseite an (Fig. 6.0).
- Bei einem JSM mit LED blinkt die Batterieanzeige und bleibt dann nach ein paar Sekunden an.
- Vergewissern Sie sich, dass die Geschwindigkeitseinstellung Ihren Bedürfnissen angemessen ist.
- Bewegen Sie den Joystick zur Regelung der Geschwindigkeit und zum Steuern des Rollstuhls.

⚠️ WARNUNG:

- Wenn Sie den Joystick vor oder gleich nach dem Einschalten des Steuersystems bewegen, erscheint die Anzeige Falsche Stellung Joystick (Fig. 6.1).
- Sie müssen den Joystick loslassen und wieder in die Mittelstellung bringen, damit der Normalbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Wenn Sie den Joystick nicht innerhalb von fünf Sekunden loslassen, kann der Rollstuhl nicht fahren, auch wenn Sie den Joystick loslassen und wieder bewegen.
- Auf der Anzeige erscheint dann die Diagnosesseite. Um die Anzeige zurückzusetzen, schalten Sie das Steuersystem aus und wieder ein.



Fig. 6.1

Fig. 6.0





Fig. 6.2

6.2 Bedienung des Steuersystems

Achten Sie darauf, dass das Steuersystem sicher montiert und die Joystick-Position korrekt ist (Fig. 6.2). Die Hand oder Gliedmaße, die Sie zum Betätigen des Joysticks verwenden, sollte abgestützt sein, zum Beispiel durch das Armpolster des Rollstuhls. Benutzen Sie den Joystick nicht als alleinige Stütze für Ihre Hand oder Extremität - die Bewegungen des Rollstuhls oder Stöße können Ihre Steuerung stören.

Fahrtechnik

Das Steuersystem interpretiert Ihre Joystickbewegungen und erzeugt entsprechende Bewegungen mit Ihrem Rollstuhl. Der Rollstuhl ist einfach zu steuern, da das System mit einer Proportionalsteuerung arbeitet, die sich besonders für unerfahrene Benutzer eignet. Eine weit verbreitete Technik besteht darin, den Joystick einfach in die Richtung zu bewegen, in die Sie fahren wollen (Fig. 6.3). Der Rollstuhl richtet sich auf die Richtung ein, in die Sie den Joystick bewegen.

Je weiter Sie den Joystick von der Mittelstellung aus bewegen, umso schneller bewegt sich der Rollstuhl. Wenn Sie den Joystick loslassen, hält der Rollstuhl an.

Das intelligente Geschwindigkeitsregelungssystem reduziert die Auswirkungen von Gefällen und verschiedenen Geländearten.

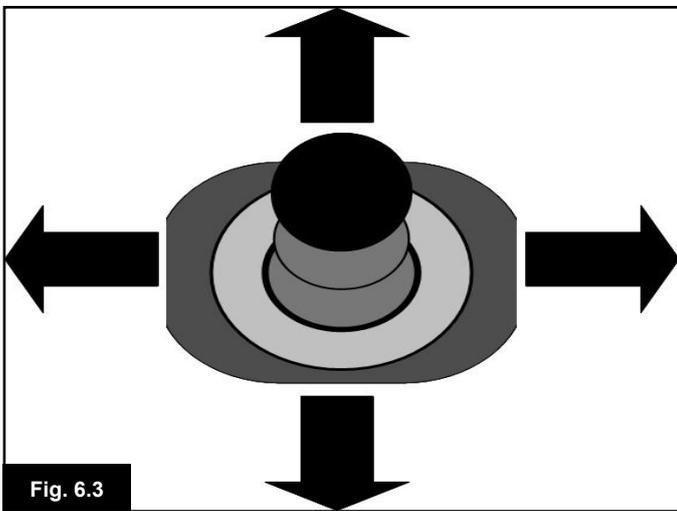


Fig. 6.3

Langsame oder schleppende Fahrt

Wenn der Rollstuhl nicht mit voller Geschwindigkeit fährt oder nicht schnell genug reagiert und die Batterie sich in gutem Zustand befindet, überprüfen Sie die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit (Fig 6.4). Wenn das Problem nicht durch das Verstellen der Geschwindigkeit behoben wird, kann ein ungefährlicher Fehler vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

⚠️ WARNUNG:

- Sie müssen in der Lage sein, einen Rollstuhl sicher zu fahren. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.
- Sollten irgendwelche Zweifel bestehen, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler / Therapeuten der Sie weiter beraten kann.

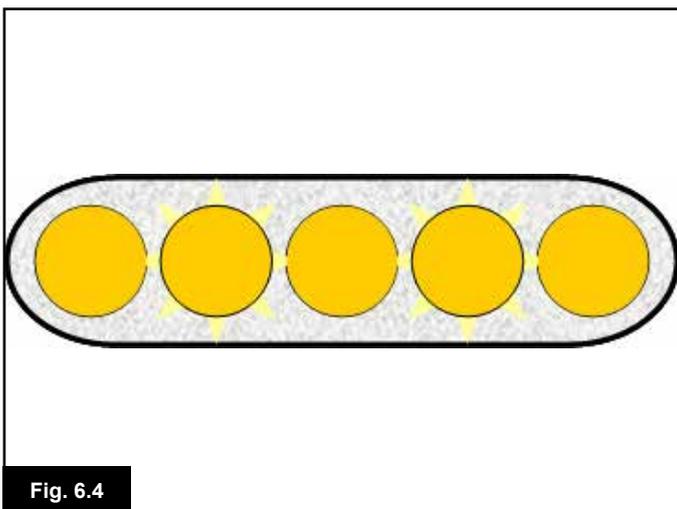


Fig. 6.4



Für ausführliche Anleitungen und Ratschläge zu Fahrtechniken für Ihren Rollstuhl und andere Fragen ziehen Sie das Benutzerhandbuch/die Bedienungsanleitung zu Rate.

7.0 Einstellungsmenü

Fig. 7.0



7.1 Einstellungsmenü

Mit dem Menü Einstellungen können Sie auf der LCD-Anzeige die Uhr einstellen und das Format anzeigen sowie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung, die Farbe des Hintergrunds und das Verhalten des Kilometerzählers einstellen. Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie gleichzeitig die Tasten Langsamer und Schneller (Fig. 7.0).

Ein Beispiel für die Anzeige des Einstellungsmenüs wird in Fig. 7.1 gezeigt.

Die einzelnen Menüpunkte werden in den folgenden Abschnitten beschrieben:

7.2 Zeit einstellen

- Wenn der Joystick nach rechts bewegt wird, wechseln Sie auf die Seite zum Einstellen der Uhr (Fig. 7.2).
- Auf der Seite zum Einstellen der Uhr werden sechs verstellbare Parameter angezeigt:
- Jahr, Monat, Datum, Tag, Stunden und Minuten. Die Option Verlassen (Exit) wird ebenfalls angezeigt (Fig. 7.2).
- Wenn Sie den Joystick nach vorne bewegen, wird der Wert des ausgewählten Parameters erhöht und wenn er nach hinten bewegt wird, wird der Wert des ausgewählten Parameters verringert.
- Wenn Sie den Joystick nach rechts bewegen, wird der nächste Parameter ausgewählt, wenn Sie ihn nach links bewegen, wird der vorherige Parameter ausgewählt.
- Wenn Datum/Uhrzeit eingestellt sind, gelangen Sie mit einer abschließenden Bewegung nach rechts zu Verlassen (Exit) und dann nach vorne oder hinten, um die Seite zum Einstellen der Uhr zu verlassen.

Fig. 7.1



Fig. 7.2





7.3 Zeit anzeigen

Damit wird das Format der Zeitanzeige eingestellt oder ausgeschaltet.

Die Optionen lauten 12h, 24h oder Aus. Mit Joystickbewegungen nach links und rechts wechseln Sie zwischen den Optionen.

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, um "Zeit anzeigen" auszuwählen (Fig. 7.3).
- Bewegen Sie den Joystick nach links, um 12h auszuwählen, erneut nach links, um 24h auszuwählen und erneut nach links, um Aus auszuwählen (Fig. 7.4).
- Bewegen Sie den Joystick nach vorne oder hinten, um Ihre Auswahl einzugeben und gleichzeitig Zeit anzeigen zu verlassen.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, um "Verlassen" (Exit) auszuwählen (Fig. 7.5).
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um zur Seite "Fahren" zurück zu gelangen.





7.4 Strecke

Damit wird die Funktionalität des Tageskilometerzählers eingestellt. Zur Auswahl der Option Strecke:

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Strecke" (Distance) markiert ist (Fig. 7.6).
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um die Option auszuwählen.
- Die nächste Seite erscheint (Fig. 7.7).

Gesamtstrecke.

Dieser Wert wird in der Elektronik gespeichert und bezieht sich auf die Gesamtstrecke, die mit dieser Elektronik zurückgelegt wurde.

Tagesstrecke

Dieser Wert wird im Joystick-Modul gespeichert und bezieht sich auf die Strecke, die seit dem letzten Zurücksetzen zurückgelegt wurde.

Strecke anzeigen

Damit wird eingestellt, ob die Gesamtstrecke oder die Tagesstrecke als die Anzeige für den Kilometerzähler auf der LCD-Anzeige erscheint.

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Strecke anzeigen" (Display Distance) markiert ist.
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts und wählen Sie "Gesamt" (Total) oder "Tages" (Trip) aus.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten oder vorne, um "Strecke anzeigen" (Display Distance) zu verlassen.

Tagesstrecke löschen

Löschen des Wertes auf dem Tageskilometerzähler:

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Tagesstrecke löschen" (Clear Trip Distance) markiert ist.
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um den angezeigten Wert zu löschen.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten oder vorne, um "Tagesstrecke löschen" (Clear Trip Distance) zu verlassen.



Verlassen

Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Verlassen" (Exit) markiert ist. Wenn Sie den Joystick nach rechts bewegen, kehren Sie zum Menü Einstellungen zurück. (Fig. 7.8).



7.5 Einstellungen anzeigen

Hintergrundbeleuchtung, (Fig. 7.9)

Damit wird die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der LCD-Anzeige eingestellt.

Der Einstellbereich ist von 0% bis 100% in 10%-Schritten.

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Hintergrundlicht" (Backlight) markiert ist.
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts, um den Wert zu erhöhen.
- Bewegen Sie den Joystick nach links, um den Wert zu verringern.
- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, um zur Seite mit den Einstellungen zurückzugehen.

Hintergrund, (Fig. 7.10)

Damit wird die Farbe des Hintergrunds eingestellt. Die Standardeinstellung ist Blau, aber bei sehr hellem Sonnenlicht ist die Anzeige mit einem weißen Hintergrund besser sichtbar (Fig. 7.11).

Zur Auswahl stehen Blau, Weiß und Auto.

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Hintergrund" (Background) markiert ist.
- Bewegen Sie den Joystick nach rechts und wählen Sie "Blau, Weiß oder Auto" aus.
- Um "Hintergrund" zu verlassen, bewegen Sie den Joystick nach hinten oder vorne.

Blau bedeutet, dass der Hintergrund in allen Profilen blau ist. Weiß bedeutet, dass der Hintergrund in allen Profilen weiß ist. Auto bedeutet, dass die Farbe vom installierten Programm eingestellt wird. Man könnte zum Beispiel Blau für die langsameren Profile für die Fahrt im Haus und Weiß für die schnelleren Profile für Fahrten im Freien verwenden. Für weitere Informationen zu diesem Parameter wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst.

Verlassen

- Bewegen Sie den Joystick nach hinten, bis "Verlassen" (Exit) markiert ist.
- Wenn Sie den Joystick nach rechts bewegen, kehren Sie zum Menü Einstellungen zurück, (Fig. 7.8).

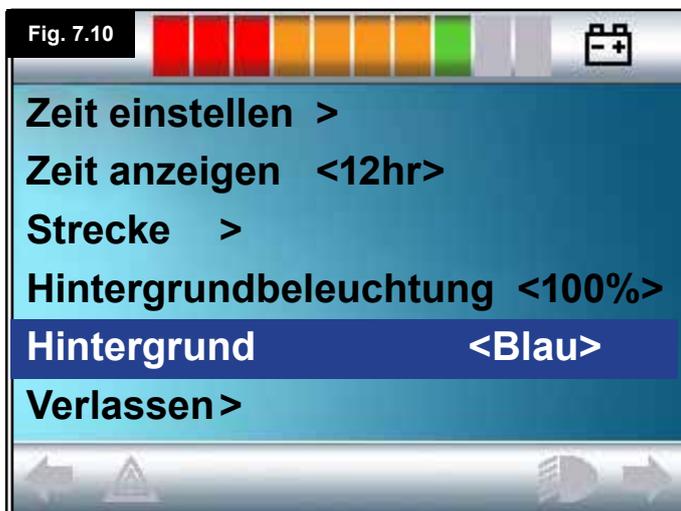




Fig. 8.0

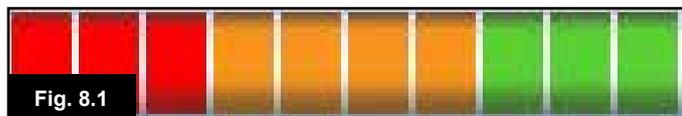


Fig. 8.1

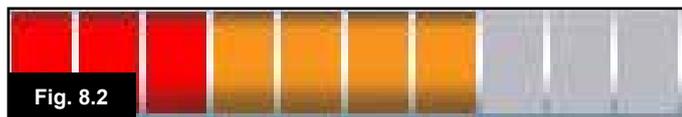


Fig. 8.2

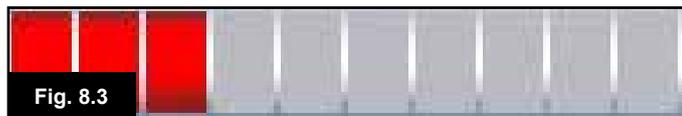


Fig. 8.3

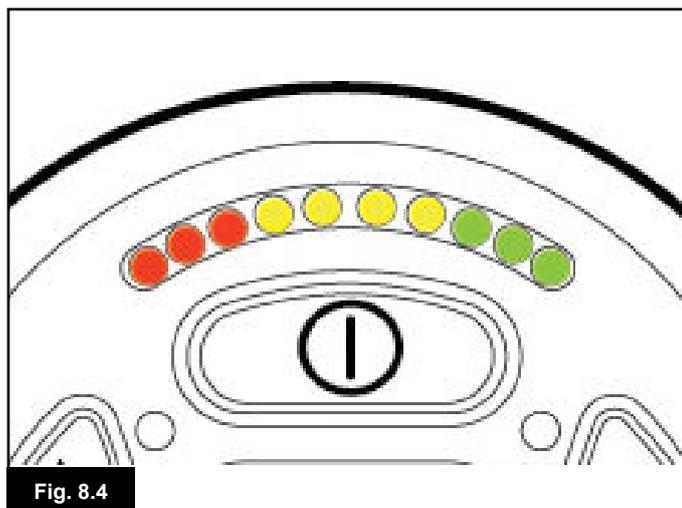


Fig. 8.4

8.0 Die Batterieanzeige

Aus der Batterieanzeige können Sie den Ladestand Ihrer Batterien ersehen. Den Umgang mit der Batterieanzeige lernen Sie am besten bei der Fahrt mit Ihrem Rollstuhl. Wie die Tankanzeige in einem Fahrzeug ist sie nicht ganz genau, aber sie trägt dazu bei, dass Ihnen der "Kraftstoff" nicht ausgeht (Fig. 8.0).

So funktioniert die Batterieanzeige:

Wenn Sie das Steuersystem einschalten, zeigt die Batterieanzeige den ungefähren Ladestand der Batterie an. Die Batterieanzeige wird etwa eine Minute nach dem Losfahren mit dem Rollstuhl etwas genauer.

Beim Auswechseln von Batterien nur den von Sunrise Medical empfohlenen Typ verwenden. Wenn Sie einen anderen Batterietyp verwenden, kann die Batterieanzeige ungenau sein.

Der Ladestand Ihrer Batterien hängt von einer Reihe von Faktoren ab: Wie Sie Ihren Rollstuhl benutzen, die Temperatur und das Alter der Batterien und wie sie hergestellt werden. Diese Faktoren wirken sich auf die Entfernung aus, die Sie mit Ihrem Rollstuhl zurücklegen können. Alle Rollstuhlbatterien verlieren mit zunehmendem Alter zunehmend ihre Leistung. Der wichtigste Faktor, der die Lebensdauer Ihrer Batterien reduziert, ist die Ladung, die den Batterien entnommen wird, bevor Sie sie wieder aufladen. Die Lebensdauer der Batterie wird auch durch die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge der Batterien reduziert.

Ihre Batterien halten länger, wenn Sie sie nicht ganz leer werden lassen. Laden Sie Ihre Batterien nach dem Entladen schnell wieder auf.

Wenn Ihre Batterieanzeige schneller als normal abfällt, kann es sein, dass Ihre Batterien abgenutzt sind.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

8.1 Ablesen der Batterieanzeige

Wenn die Batterieanzeige rot, gelb und grün anzeigt, werden die Batterien aufgeladen. (Fig. 8.1)

Wenn die Batterieanzeige nur rot und gelb anzeigt, sollten die Batterien so bald wie möglich aufgeladen werden. (Fig. 8.2)

Wenn die Batterieanzeige nur rot anzeigt oder langsam rot blinkt, müssen die Batterien sofort aufgeladen werden. (Fig. 8.3).

An Joystick-Modulen mit LED entsprechen die farbigen LED den farbigen Balken auf der Version mit LCD-Anzeige (Fig. 8.4).


WARNUNG:

Bedienen Sie das Steuersystem nicht, wenn die Batterie fast leer ist. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe kann dazu führen, dass Sie in einer gefährlichen Lage festsitzen wie etwa mitten auf der Straße. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.



Für umfassende Informationen und Ratschläge zu Batterien und zum Aufladen von Batterien ziehen Sie das Benutzerhandbuch/die Bedienungsanleitung für Ihren Rollstuhl zu Rate.

Fig. 9.0

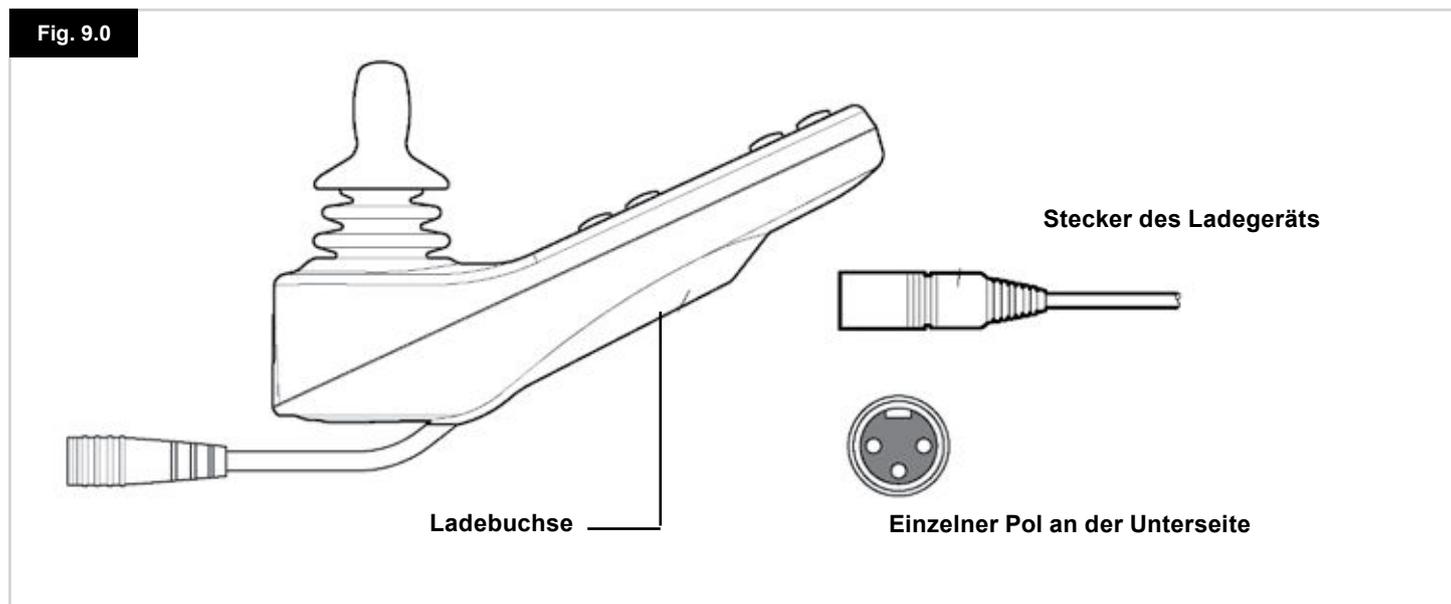

9.1 Batterien aufladen

Zum Aufladen der Rollstuhlbatterien:

- Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in die Ladebuchse am R-Net Bedienpult ein.
- Wenn das Ladegerät angeschlossen ist, können Sie mit dem Rollstuhl nicht fahren.
- Beim Einstecken des Steckers für das Ladegerät darauf achten, dass sich die einpolige Seite unten befindet wie in Fig. 9.0 gezeigt und stecken Sie dann den Stecker horizontal in das R-net ein.
- Die ausgeformte Führung am R-net wird Ihnen beim Einstecken behilflich sein. Achten Sie darauf, dass der Stecker ganz eingesteckt wird.

WARNUNG:

- Überschreiten Sie den maximalen Ladestrom von 12A-rms nicht. Verwenden Sie immer ein externes Ladegerät mit einem Neutrik NC3MX Stecker. Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann zu einem schwachen Durchgangswiderstand im Steckverbinder des Ladegeräts führen, was zur Überhitzung des Steckers am Ladegerät führt. Dies stellt eine potenzielle Verbrennungsgefahr für den Benutzer dar. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.
- Während des Ladevorgangs die Batterien nicht abnehmen und den Stromkreis des Schutzschalters nicht unterbrechen. Die Nichtbeachtung dieser Vorgabe könnte zu einer Verbrennungs- oder Brandgefahr führen.
- Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.

WARNUNG:

- Verwenden Sie nur das mit dem Rollstuhl mitgelieferte Ladegerät.
- Die Verwendung des falschen Ladegeräts könnte zu Schäden an den Batterien, am Rollstuhl, Steuersystem oder am Ladegerät oder zur Überhitzung von Teilen führen, d.h., es könnte eine Verbrennungs- oder Brandgefahr bestehen.
- Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, wenn das verwendete Ladegerät nicht mit dem Steuersystem oder mit anderen Teilen des Rollstuhls kompatibel ist.



Für umfassende Informationen und Ratschläge zu Batterien und zum Aufladen von Batterien ziehen Sie das Besitzerhandbuch/die Bedienungsanleitung für Ihren Rollstuhl zu Rate.

Fig. 10.0



HINWEIS: Kapitel 10.1 - 10.9 Siehe Fig. 10.0

10.1 Joystick

Damit werden die Geschwindigkeit und die Fahrtrichtung des Rollstuhls geregelt bzw. gesteuert. Bewegen Sie den Joystick in die gewünschte Fahrtrichtung. Je weiter Sie ihn bewegen, desto schneller die Fahrt. Wenn Sie den Joystick loslassen, hält der Rollstuhl an und die Bremse wird automatisch betätigt. Im Modus Verstellmotorsteuerung schalten Sie durch das Bewegen des Joysticks nach links oder rechts zwischen den verfügbaren Verstellmotoren um. Der ausgewählte Verstellmotor wird durch das Bewegen des Joysticks nach vorne und hinten verstellt.

10.2 Anzeige Höchstgeschwindigkeit

Mit dieser Anzeige wird die eingestellte Höchstgeschwindigkeit für den Rollstuhl angezeigt.

Mit dieser Anzeige wird auch angezeigt, ob die Geschwindigkeit des Rollstuhls beschränkt wird oder ob das Steuersystem gesperrt ist, siehe Abschnitt 5.21

Es gibt fünf Einstellungen für die Geschwindigkeit – Schritt 1 (1 LED) ist die niedrigste Geschwindigkeit und Schritt 5 (5 LED) ist die höchste Geschwindigkeit.

10.3 Taste zur Erhöhung / Verringerung der Geschwindigkeit

Mit dieser Taste wird die Einstellung für die Höchstgeschwindigkeit erhöht oder verringert.

10.4 Modustaste

Mit der Modustaste kann der Benutzer durch die verfügbaren Betriebsmodi für das Steuersystem navigieren. Die verfügbaren Modi sind von der Programmierung und der Auswahl der zusätzlichen Ausgabegeräte abhängig, die an das Steuersystem angeschlossen sind.

In allen anderen Modi außer im Fahr- und Sitzmodus sind die LEDs für Geschwindigkeit und Verstellmotor (Benutzermodul) alle erloschen.

10.5 Kontrollanzeige

Damit wird angezeigt, ob der Benutzer oder die Begleitperson die Kontrolle über die Steuerung hat. Wenn die rote Rollstuhllampe aufleuchtet, hat das Eingabegerät des Benutzers die Kontrolle. Wenn die grüne Lampe für die Begleitsteuerung aufleuchtet, hat die Begleitperson die Kontrolle.

10.6 Kontrollschalter

Damit wird die Fahrsteuerung des Rollstuhls vom Eingabegerät des Benutzers auf die Begleitperson umgeschaltet.

10.7 Pflege

1. Vermeiden Sie Stöße gegen Ihr Steuersystem, vor allem gegen den Joystick.
2. Achten Sie beim Transport des Rollstuhls darauf, dass das Steuersystem gut geschützt ist.
3. Um die Lebensdauer des Steuersystems zu verringern, setzen Sie es so wenig wie möglich extremen Bedingungen aus. Reinigen Sie Ihr Steuersystem immer, wenn es durch Essensreste oder Getränke verschmutzt wird.
4. Verwenden Sie dazu ein feuchtes Tuch und mit Wasser verdünntes Spülmittel. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Reiniger auf Alkoholbasis.

10.8 Tägliche Überprüfungen

Joystick:

Überprüfen Sie bei ausgeschaltetem Steuersystem, dass der Joystick nicht verbogen oder beschädigt ist und dass er in die Mittelstellung zurückkehrt, wenn Sie ihn loslassen. Wenn ein Defekt besteht, benutzen Sie Ihren Rollstuhl nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

10.9 Wöchentliche Überprüfungen

Elektrische Bremse:

Dieser Test sollte auf ebenem Untergrund mit mindestens einem Meter Platz um den Rollstuhl durchgeführt werden. Schalten Sie das Steuersystem ein.

Überprüfen Sie, dass die Batterieanzeige nach 1 Sekunde an bleibt oder langsam blinkt.

Schieben Sie den Joystick langsam nach vorne, bis die elektrische Bremse betätigt wird. Der Rollstuhl kann sich jetzt evtl. bewegen.

Lassen Sie den Joystick sofort los. Sie müssen innerhalb von ein paar Sekunden hören, wie die elektrischen Bremsen betätigt werden.

Wiederholen Sie den Test drei Mal und schieben Sie dabei den Joystick jeweils nach hinten, nach links und rechts.

Beleuchtung + Verstellmotoren:

Wenn Ihr Rollstuhl mit Scheinwerfern, Blinker oder einem Verstellmotor zur Sitzverstellung ausgestattet ist, überprüfen Sie deren Funktion.

Anschlüsse:

Überprüfen Sie, dass alle Anschlüsse gesichert sind, richtig passen und unbeschädigt sind.

Kabel:

Überprüfen Sie den Zustand aller Kabel auf Beschädigung.

Joystick-Manschette:

Überprüfen Sie die dünne Gummimanschette um den Sockel des Joysticks auf Beschädigung oder Risse. Führen Sie nur eine Sichtkontrolle durch, berühren Sie die Manschette nicht.

Montage:

Achten Sie darauf, dass die Steuerung sicher am Rollstuhl befestigt ist. Schrauben nicht zu fest anziehen.

11.0 Vorkehrungen für die Benutzung

WARNUNG:

Wenn sich der Rollstuhl auf ungewöhnliche Weise bewegt, LASSEN SIE SOFORT DEN JOYSTICK LOS. Damit wird der Rollstuhl unter allen Bedingungen sofort gestoppt.

11.1 **WARNUNGEN:**

- Fahren Sie mit dem Rollstuhl nicht außerhalb der Beschränkungen, die im Benutzerhandbuch des Rollstuhls angegeben sind, zum Beispiel maximale Steigungen, Bordsteinhöhe etc.
- Fahren Sie mit dem Rollstuhl nicht an Stellen oder auf Oberflächen, an denen der Verlust der Bodenhaftung gefährlich sein könnte, zum Beispiel an nassen, grasbewachsenen Abhängen.
- Fahren Sie mit dem Rollstuhl nicht, wenn Sie wissen, dass das Steuersystem oder andere wichtige Teile reparaturbedürftig sind.
- Obwohl das R-net Steuersystem für eine extrem hohe Betriebssicherheit ausgelegt ist und jede Einheit während der Herstellung strengen Tests unterzogen wird, besteht die Möglichkeit, dass ein Systemdefekt auftritt (auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist). Wenn bei einem Systemdefekt bestimmte Bedingungen auftreten, muss das Steuersystem (aus Sicherheitsgründen) den Rollstuhl sofort anhalten. Wenn die Gefahr besteht, dass Sie beim plötzlichen Abbremsen aus dem Rollstuhl fallen können, muss immer, wenn der Rollstuhl fährt, unbedingt ein mit dem Rollstuhl mitgelieferter Beckengurt angelegt werden. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus dem unerwarteten Anhalten des Rollstuhls oder der unsachgemäßen Benutzung des Rollstuhls oder des Steuersystems ergeben.
- Benutzen Sie das Steuersystem nicht, wenn der Rollstuhl ein unerwartetes Verhalten oder ungewöhnliche Anzeichen von Erwärmung, Funken oder Rauch zeigt. Schalten Sie das Steuersystem sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.
- Elektronische Geräte können von Elektromagnetischer Überlagerung (EMÜ) betroffen sein. Die Überlagerung kann durch Radiosender, Fernsehsender, andere Funksender und Mobiltelefone erzeugt werden. Wenn der Rollstuhl ein unerwartetes Verhalten zeigt, das auf EMÜ zurückzuführen ist, schalten Sie das Steuersystem sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.
- Der Rollstuhlbenutzer muss alle Sicherheitshinweise für den Rollstuhl beachten. Sunrise Medical haftet nicht für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Vorgabe ergeben.



Ihr Rollstuhl ist mit allen anwendbaren nationalen und internationalen EMV-Vorschriften konform. Ausführliche Anweisungen und Ratschläge zur Konformität mit EMV und EMÜ entnehmen Sie dem Besitzerhandbuch/der Bedienungsanleitung für Ihren Rollstuhl.

11.2 Sicherheitsprüfungen

Die elektronischen Schaltkreise in Ihrem Steuersystem sind für eine extrem hohe Sicherheit und Betriebssicherheit ausgelegt. Der eingebaute Mikrocomputer führt bis zu 100 Mal pro Sekunde Sicherheitsprüfungen durch. Zur Ergänzung dieser Sicherheitsprüfungen sollten Sie die folgenden regelmäßigen Prüfungen durchführen.

Wenn das Steuersystem eine dieser Prüfungen nicht besteht, benutzen Sie den Rollstuhl nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Tägliche Überprüfungen

Joystick:

Überprüfen Sie bei ausgeschaltetem Steuersystem, dass der Joystick nicht verbogen oder beschädigt ist und dass er in die Mittelstellung zurückkehrt, wenn Sie ihn bewegen und loslassen. Wenn ein Problem auftritt, brechen Sie die Sicherheitsprüfungen ab und wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

Wöchentliche Überprüfungen

Parkbremse:

Dieser Test sollte auf ebenem Untergrund an einer übersichtlichen und geeigneten Stelle um den Rollstuhl durchgeführt werden.

1. Schalten Sie das Steuersystem ein.
2. Überprüfen Sie, dass die Anzeige/ Batterieanzeige nach der Initialisierung an bleibt und dass die Batterieanzeige eine ausreichende Ladung anzeigt.
3. Schieben Sie den Joystick langsam nach vorne, bis die Parkbremse betätigt wird. Der Rollstuhl kann sich jetzt evtl. bewegen.
4. Lassen Sie den Joystick sofort los. Sie müssen innerhalb von ein paar Sekunden hören, wie die Parkbremse betätigt wird.
5. Wiederholen Sie den Test noch dreimal, schieben Sie den Joystick langsam nach hinten, nach links und nach rechts.

Anschlüsse:

Achten Sie bei allen Steckverbindern auf festen Sitz.

Kabel:

Überprüfen Sie den Zustand aller Kabel und Steckverbinder auf Beschädigung.

Joystick-Manschette:

Überprüfen Sie die dünne Gummimanschette um den Sockel des Joysticks auf Beschädigung oder Risse.

Führen Sie nur eine Sichtkontrolle durch, berühren Sie die Manschette nicht.

Montage:

Überprüfen Sie, dass alle Komponenten des Steuersystems fest montiert sind. Die Sicherungsschrauben nicht zu fest anziehen.

11.3 Service

Um den fortlaufenden zufriedenstellenden Betrieb zu gewährleisten, empfehlen wir, nach einem Zeitraum von 1 Jahr nach der Inbetriebnahme an Ihren Rollstuhl und Ihr Steuersystem von unserem Kundendienst eine Inspektion durchführen zu lassen. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst für weitere Informationen darüber, wann die Inspektion fällig ist.

ANSCHRIFT und
TELEFONNUMMERN IHRES
KUNDENDIENSTS









www.SunriseMedical.com



curtisswright.com