




WHILL Europe B.V.
Johan-Cruijff-Boulevard 61,
1101 DL, Amsterdam,
Niederlande
info@whill-europe.com
www.whill.inc



Vol 1.0

*Dieses Gerät wurde entwickelt, um Menschen, die einen Elektrorollstuhl bedienen können, Mobilität zu bieten.



Move More. Live More.

Erfahren Sie die Welt mit WHILL und leben Sie das Leben ohne Grenzen.

Innovative Mobilitätsgeräte mit ungeahnten Möglichkeiten.

WHILL Model C2





Komfort

Das Model C2 ist einfach zu bedienen und kann enge Kurven fahren, um Sie dorthin zu bringen, wohin Sie wollen.



Der Korb befindet sich bequem unter dem Sitz, so dass Sie Ihre Gegenstände leicht ein- und ausräumen können.
Abmessungen: 24 cm x 29 cm x 43 cm



Heben Sie die Armlehne an, um sich bequem von der Seite in den Sitz zu setzen. Stellen Sie sich für zusätzliche Stabilität auf die Fußstütze.



Abenteuer mit WHILL – Das Model C2 kann enge Kurven fahren und ermöglicht es Ihnen, an Orte zu gelangen, an die ein handelsüblicher Elektrorollstuhl Sie nicht bringen kann.



Schalten Sie den Strom ein und stellen Sie die Drehzahl mit einer Hand ein. Das Gerät brems automatisch, wenn Sie die Steuerung loslassen, sogar an einer Steigung.






Leistungsstark

Beeindruckende Leistung, mit der Sie mehr sehen und tun können. Leben Sie das Leben, das Sie anstreben, mit dem WHILL Modell C2.

Auf ins Abenteuer!



Überwinden Sie mühelos Hindernisse bis zu 5 cm Höhe dank zweier leistungsstarker Motoren und großer omnidirektionaler Vorderräder.

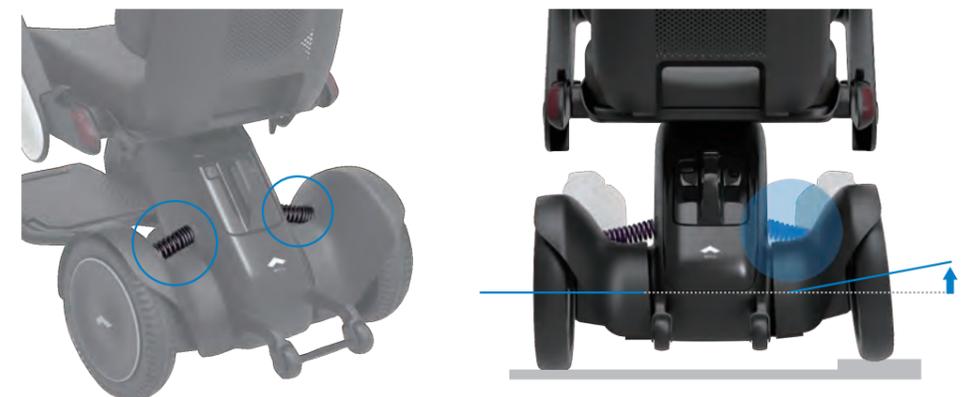

Die Hinterradfederung dämpft die Stöße beim Fahren über holprige Straßen oder Hindernisse.



Transportierbar

In vier einfachen Schritten demontierbar.
 Das Model C2 kann zerlegt werden, um es einfach im Kofferraum eines jeden Autos zu transportieren. Ganz gleich, ob Sie am Wochenende einkaufen gehen oder mit Ihrer Familie unterwegs sind, mit dem Model C2 können Sie das Leben in vollen Zügen genießen.



1 Nehmen Sie den Akku heraus.



2 Ziehen Sie den Hebel unter dem Sitz nach oben.



3 Ziehen Sie den Sitz hoch.



4 Ziehen Sie den Hebel neben dem Akku zu sich, um die Teile zu trennen.

Leicht zerlegbar,
 passt in den
 Kofferraum
 Ihres Autos

*Die obigen Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung.



Farbvariation

Fahren Sie stilvoll.

Wählen Sie aus acht Farben für die Armlehnen und passen Sie das Model C2 an Ihren persönlichen Stil an.



Weiß



Grau*



Schwarz



Rot



Rosa



Lila*



Gold

*Farbe in limitierter Auflage

Wir haben an alles gedacht!

Die Rückmeldung unserer Kunden hat zur Gestaltung unseres Modells C2 beigetragen. Wir haben alle Funktionen eingebaut, nach denen Sie suchen, einschließlich einer Fernverriegelung und der Möglichkeit, für weitere Sicherheit die Höchstgeschwindigkeit anzupassen.



Heckleuchte

Das Rücklicht ist auch mit einer über die Rückenstütze gehängten Tasche gut sichtbar, so dass Sie nachts sicher auf der Straße unterwegs sind.

Verhindert Abweichen vom Weg



Fahren Sie auf einem geeigneten Weg geradeaus.

Der Steuerknopf kann links oder rechts positioniert werden.



Akku
Abnehmbarer Akku.

5

Stunden Ladezeit



Das Model C2 kann mit einer fünfstündigen Ladung 18 km weit fahren und bietet Ihnen damit ausreichend Energie für Ihren Alltag.




2,7 kg

Der Akku kann herausgenommen und an einer üblichen Haushaltssteckdose aufgeladen werden.



App

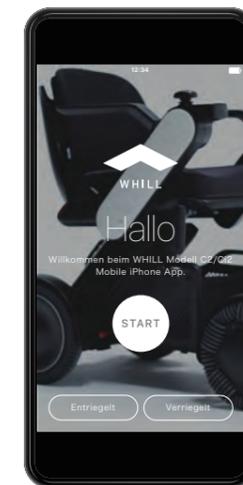

Mit der WHILL-App prüfen Sie Ihren Gesamtkilometerstand, die zurückgelegte Strecke, den Akkustand, die vollen Ladezyklen und mehr. Außerdem können Sie das Gerät ver- und entriegeln.

*Sie müssen die App zuvor installieren.




Über den intuitiv zu bedienenden Steuerungsbildschirm können Sie das Gerät aus der Ferne steuern.



Stellen Sie den Fahrmodus auf „Eco“, „Normal“ oder „Sport“ ein, je nach Ihren Bedürfnissen.

Einstellung

Die verschiedenen Komponenten von Modell C2 lassen sich leicht einstellen, von der Sitzhöhe und dem Winkel der Rückenlehne bis hin zur Position des Steuerknopfs (Rechts- oder Linkslenker), um Ihnen ein komfortables Fahrerlebnis zu bieten.

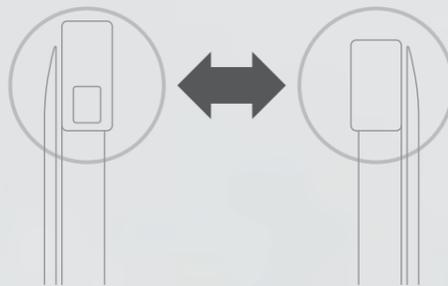

Der Steuerknopf kann links oder rechts positioniert werden.

- 1. Steuerung Höhe..... 670, 690, 710, 730 mm
- 2. Rückenlehne Neigung 90, 95, 100°
- 3. Rückenlehne Höhe 340 - 460 mm
- 4. Sitzhöhe 405, 425, 445, 465, 485 mm
- 5. Sitzfläche Neigung 5°
- 6. Sitztiefe 400 mm
- 7. Sitzbreite..... 400 mm
- 8. Fußstütze Neigung 2°
- 9. Fußstütze Höhe..... 127 mm

Warnhinweis: Wenn Sie ein eigenes Kissen benutzen, achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, dass es einen ausreichenden Flammenschutz bietet.

Leistungsangaben

- Reichweite 18 km
- Höchstgeschwindigkeit 6 km/h
- Antriebssystem..... Zwei-Motor-
Antriebssystem
- Max. Steigung 10°
- Wenderadius 760 mm
- Hindernisüberwindung bis... 50 mm
- Bodenfreiheit 57 mm
- Bremssystem..... Elektromagnetisch
- Max. Tragfähigkeit 136 kg
- Gesamtlänge
(einschließlich Fußablage): ... 985 mm
- Gesamtbreite: 554 mm
- Gesamthöhe: 745 - 945 mm
- Sitzbaugruppe
Länge: 570 mm
Breite: 550, 600, 650 mm
Höhe: 480 mm
- Heckantriebsbasis
Länge: 590 mm
Breite: 554 mm
Höhe: 300 mm
- Frontantriebseinheit
Länge: 720 mm
Breite: 554 mm
Höhe: 270 mm
- Vorderradtyp: Omnidirektionales Rad
- Hinterradtyp: Standard: Luftloser Reifen

Weitere Angaben

- Ladezeit..... 5 Std.
- Akku Lithium-Ionen
(25,3 V x 10,6 Ah)
- Akku-Ladezyklen ~1.000
- Akku-Wh 269 Wh
- Betriebsbedingungen -15 - 40 °C
- Sitzkissen 400 mm x 400 mm
450 mm x 450 mm
- Rückleuchten LED-Licht (rot)
- Hupe Eingebaut, Schall-
pegel > 65 dB
- Rollstuhl-Klasse A



*Verwenden Sie das Gerät nicht als Sitz in einem Auto oder anderen Fahrzeug.

*Das unbesetzte Gerät ist für den Land- und Lufttransport geeignet.

Zubehör

Erwerben Sie Zubehör für noch mehr Komfort und Personalisierung.



Armstützenabdeckungen
 Sie können die Farbe ändern, indem Sie eine weitere Armstütze in einer der acht Farben erwerben.
 Paar mit linker und rechter Stütze.



Beckengurt
 Stabilisiert die Sitzposition auch in Hanglagen.



Akku
 Der 2,7 kg leichte Akku kann auch als Ersatzakku verwendet werden.



Akkuladegerät
 Es ist eine großartige Ergänzung zu einem Ersatzakku und hilft Ihnen, von einem vollgeladenen Akku zum nächsten vollgeladenen Akku zu wechseln, damit Sie in Bewegung bleiben können.



Stock-Halter
 T-förmige Stöcke, Kupplungsstöcke und Gehhilfen können an der Hauptkarosserie befestigt werden.



Joystick
 Sie können ihn bedienen, indem Sie ihn mit der Hand ergreifen oder zwischen die Finger nehmen.



Armlehnenpolster
 Ein Polster mit Dämpfungseigenschaften, das an der Armauflage befestigt werden kann. Die Höhe der Armauflage kann um 3 cm erhöht werden.

Sonderausstattung



Staubschutzhülle
 Schützt das Fahrzeug vor Staub und Schmutz, wenn es im Freien abgestellt wird*.
 *Sie ist nicht wasserdicht. Nicht zum Schutz vor Regen verwenden.



Seitentasche
 Eine Seitentasche, die an der Armauflage befestigt werden kann. Sie können darin persönliche Gegenstände wie Smartphone oder Geldbeutel in Reichweite aufbewahren. Im Inneren der Tasche befindet sich außerdem eine Reißverschlusstasche.



Move More.
Live More.

